




Meistern Sie Ihre Herausforderungen

Schönheit in rot und weiß

initial
GC Initial®
IQ Lustre
Pastes NF
von GC,
die universelle
dreidimensionale
Keramikmalfarbe

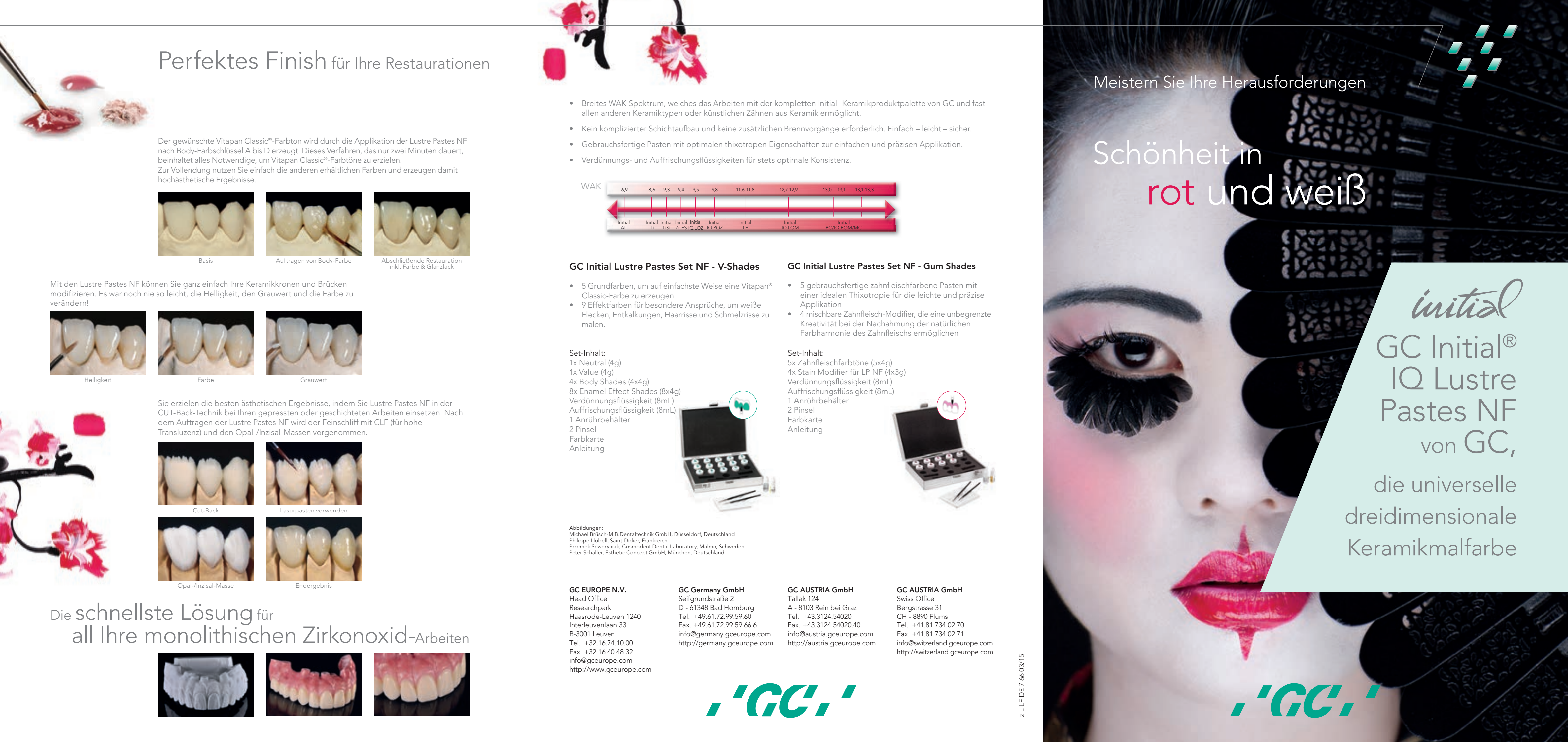

Perfektes Finish für Ihre Restaurationen

Der gewünschte Vitapan Classic®-Farbton wird durch die Applikation der Lustre Pastes NF nach Body-Farbschlüssel A bis D erzeugt. Dieses Verfahren, das nur zwei Minuten dauert, beinhaltet alles Notwendige, um Vitapan Classic®-Farbtöne zu erzielen. Zur Vollendung nutzen Sie einfach die anderen erhältlichen Farben und erzeugen damit höchstästhetische Ergebnisse.



Basis



Auftragen von Body-Farbe



Abschließende Restauration
inkl. Farbe & Glanzlack

Mit den Lustre Pastes NF können Sie ganz einfach Ihre Keramikronen und Brücken modifizieren. Es war noch nie so leicht, die Helligkeit, den Grauwert und die Farbe zu verändern!



Helligkeit




Farbe




Grauwert

Sie erzielen die besten ästhetischen Ergebnisse, indem Sie Lustre Pastes NF in der CUT-Back-Technik bei Ihren gepressten oder geschichteten Arbeiten einsetzen. Nach dem Auftragen der Lustre Pastes NF wird der Feinschliff mit CLF (für hohe Transluzenz) und den Opal-/Inzisal-Massen vorgenommen.

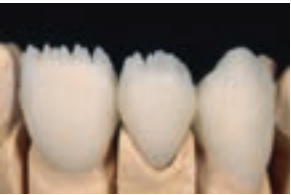

Cut-Back

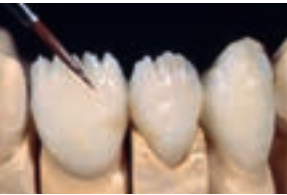

Lasurpasten verwenden



Opal-/Inzisal-Masse




Endergebnis

Die schnellste Lösung für
all Ihre monolithischen Zirkonoxid-Arbeiten



- Breites WAK-Spektrum, welches das Arbeiten mit der kompletten Initial- Keramikproduktpalette von GC und fast allen anderen Keramiktypen oder künstlichen Zähnen aus Keramik ermöglicht.
- Kein komplizierter Schichtaufbau und keine zusätzlichen Brennvorgänge erforderlich. Einfach – leicht – sicher.
- Gebrauchsfertige Pasten mit optimalen thixotropen Eigenschaften zur einfachen und präzisen Applikation.
- Verdünnungs- und Auffrischungsflüssigkeiten für stets optimale Konsistenz.

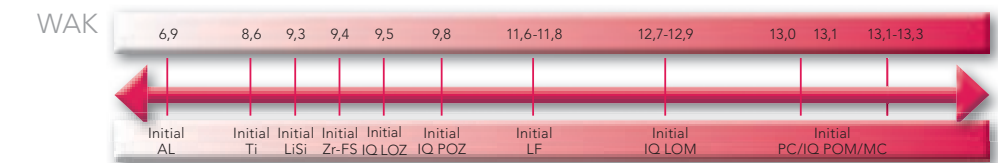

GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-Shades

- 5 Grundfarben, um auf einfachste Weise eine Vitapan® Classic-Farbe zu erzeugen
- 9 Effektfarben für besondere Ansprüche, um weiße Flecken, Entkalkungen, Haarrisse und Schmelzrisse zu malen.

Set-Inhalt:
1x Neutral (4g)
1x Value (4g)
4x Body Shades (4x4g)
8x Enamel Effect Shades (8x4g)
Verdünnungsflüssigkeit (8mL)
Auffrischungsflüssigkeit (8mL)
1 Anrührbehälter
2 Pinsel
Farbkarte
Anleitung



Abbildungen:
Michael Brusch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Deutschland
Philippe Lobell, Saint-Didier, Frankreich
Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Malmö, Schweden
Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, München, Deutschland

GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades

- 5 gebrauchsfertige zahnfleischfarbene Pasten mit einer idealen Thixotropie für die leichte und präzise Applikation
- 4 mischbare Zahnfleisch-Modifier, die eine unbegrenzte Kreativität bei der Nachahmung der natürlichen Farbharmonie des Zahnfleisches ermöglichen

Set-Inhalt:
5x Zahnfleischfarbtöne (5x4g)
4x Stain Modifier für LP NF (4x3g)
Verdünnungsflüssigkeit (8mL)
Auffrischungsflüssigkeit (8mL)
1 Anrührbehälter
2 Pinsel
Farbkarte
Anleitung



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
D - 61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60
Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info@germany.gceurope.com
http://germany.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124
A - 8103 Rein bei Graz
Tel. +43.3124.54020
Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com
http://austria.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31
CH - 8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com



z L L F D E 7 66 03/15

Meistern Sie Ihre Herausforderungen mit Initial von GC

Lustre Pastes NF von GC, die **universelle dreidimensionale Keramikmalfarbe**, die all Ihren wertvollen Arbeiten mehr **Ästhetik** verleiht – einfach durch Bemalen.

Sie benötigen keinen komplizierten Schichtaufbau oder zusätzliche Brennvorgänge mehr, um eine **unübertroffene Vitalität** und einen **natürlichen Glanz** bei allen Restaurationen zu erreichen. Mit den Lustre Pastes NF (auf Basis feiner Keramikpartikel) bleiben die Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung Ihrer Kronen und Brücken die gleichen, unabhängig davon welche Technik Sie für die Herstellung der Keramik-Restaurationen verwenden.

Müssen Sie die Farbe, die Helligkeit, den Grauwert oder den Oberflächenglanz Ihrer geschichteten Kronen und Brücken verändern? Sie können die Lustre Pastes NF auf allen Keramiken, des Initial Produktportfolios verwenden.



Suchen Sie nach einer Lösung, wie Sie Ihrer mit CAD/CAM produzierten monolithischen Arbeit noch mehr Vitalität verleihen können? Lustre Pastes NF sind in jedem Fall die Lösung.



Wenn Sie Ihre Keramiken lieber pressen ... dann beginnen Sie mit den Systemen Initial IQ - One Body, Press-over-Metal oder Press-over-Zircon und charakterisieren Sie die Keramik in einem weiteren Arbeitsschritt.



Dieses System ermöglicht es Ihnen, Ihre Kronen und Brücken individueller zu gestalten UND einen völlig natürlichen Übergang vom Kronenrand zum Zahnfleisch zu erzielen ... einfach durch Bemalen.



Gestalten Sie Ihre keramische Ästhetik mit Lustre Pastes NF von GC. Für weiße und rote Ästhetik


Lustre Pastes NF Gum Shades

Sie finden hier alles was Sie benötigen, um in wenigen einfachen Arbeitsschritten einen natürlichen Übergang vom Kronenrand zum Zahnfleisch zu erzeugen. Die fünf zahnfleischfarbenen Lustre Pastes ermöglichen eine individuelle Anpassung, um die Zahnfleischfarbe in ihrer natürlichen Harmonie darzustellen. Sie können die vier mischbaren Zahnfleisch-Modifizier mit grenzenloser Kreativität einsetzen, um die individuelle Zahnfleischsituation einfach nachzubilden. Die Lustre Pastes NF Gum Shades sind auf Grundlage einer speziellen Mischung von nicht fluoreszierenden, rosafarbenen Keramikpartikeln hergestellt, die das Aussehen des natürlichen Zahnfleisches perfekt nachbilden.



Lustre Pastes NF V-Shades

Sie finden hier alles was Sie benötigen, um Ihre Keramiken in wenigen einfachen Arbeitsschritten zu colorieren oder farblich zu verändern. Beginnen Sie mit der Auswahl der richtigen Body-Farbe A, B, C oder D entsprechend dem gewünschten Vitapan Classic®-Farbton. Allein durch einmaliges Auftragen können Sie in nur zwei Minuten ein natürliches Aussehen mit Fluoreszenz und ausgezeichneter Lichtdynamik erzielen. Danach können Sie Ihre Kronen und Brücken individuell anpassen, indem Sie weiße Flecken, Entkalkungen, Haarrisse und Schmelzrisse mit einer den Enamel Effect-Farben aufmalen, um höchstästhetische Ergebnisse zu erzielen. Mittels einer speziellen Value-Farbe können Sie sogar den Helligkeitswert Ihrer Keramikarbeiten verändern.

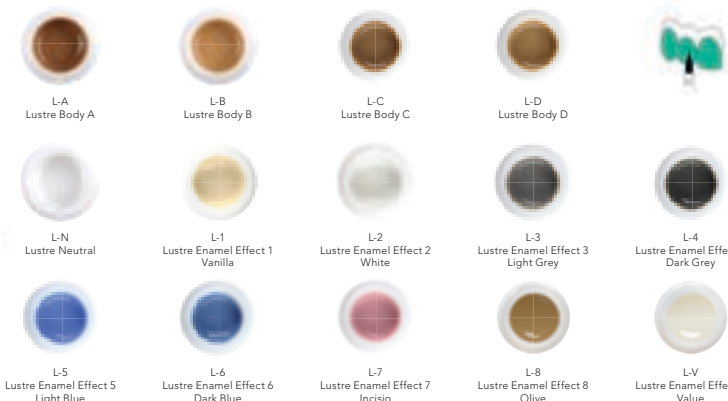

Zwei Systeme – ein Ansatz: Malen Sie Ihre rote und weiße Ästhetik

