

KLINISCHE ANWENDUNG

Beispiel: GC UNIFAST TRAD



Patient mit zu ersetzender Metallkeramikkrone auf Zahn 12



Abformung vor der Präparation




Fertige Präparation



GC UNIFAST TRAD 10-15 Sekunden mischen



Abformung mit angemischtem GC UNIFAST TRAD füllen

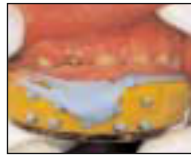

In den Mund einsetzen




2'30" nach Mischbeginn entfernen
Das Material erreicht eine Temperatur von +/- 40°C



Temporäre Krone vor dem Ausarbeiten



Ausarbeiten des Provisoriums 4 Minuten nach Mischbeginn

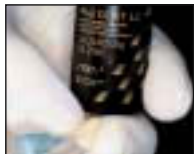

Eine glänzende Oberfläche wird durch die Applikation von GC Fuji COAT LC erzielt



Die temporäre Krone aus GC UNIFAST TRAD mit GC Freegenol befestigen



Endresultat

DAS GC-SORTIMENT FÜR DIE PROVISORISCHE VERSORGUNG AUF EINEN BLICK

GC Provitec

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acryl Komposit Basis



GC FREEGENOL

Zinkeugenol-freier temporärer Befestigungszement



GC K.Y. PLIER

Zange zur Entnahme prothetischer Versorgungen



HANDELSFORMEN

GC UNIFAST TRAD



- **NACHFÜLLPACKUNGEN**
100 g Pulver, Ivory, N.3X, N.8
250 g Pulver, Ivory, N.3X, N.8
1 kg Pulver, Ivory, N.3X, N.8
100 g Flüssigkeit
250 g Flüssigkeit

GC UNIFAST LC



- **EINFÜHRUNGSPACKUNG**
Pulver A2, A3, B2, B3, C2, Translucent, je 30 g
Flüssigkeit 2 x 60 g
- **NACHFÜLLPACKUNGEN**
50 g Pulver, A2, A3, B2, B3, C2, Translucent
2 x 15 g Flüssigkeit

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32 16 39.80.50
Fax. +32 16 40.02.14
E-mail info@gceurope.com
<http://www.gceurope.com>

GC GERMANY GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
D - 81245 München
Tel. +49 89 89.66.74.0
Fax. +49 89 89.66.74.29
E-mail info@germany.gceurope.com
<http://germany.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.
Austrian Office
Tallak 124
A - 8103 Rein bei Graz
Tel. +43 3124.54020
Fax. +43 3124.54020
E-mail info@austria.gceurope.com
<http://austria.gceurope.com>


z O L F DE 6 35 - 04/99

©Vita ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland

GC
FIRST IS QUALITY

GC UNIFAST

PROVISORISCHES KRONEN- UND BRÜCKENMATERIAL
AUF METHYLMETHACRYLATBASIS

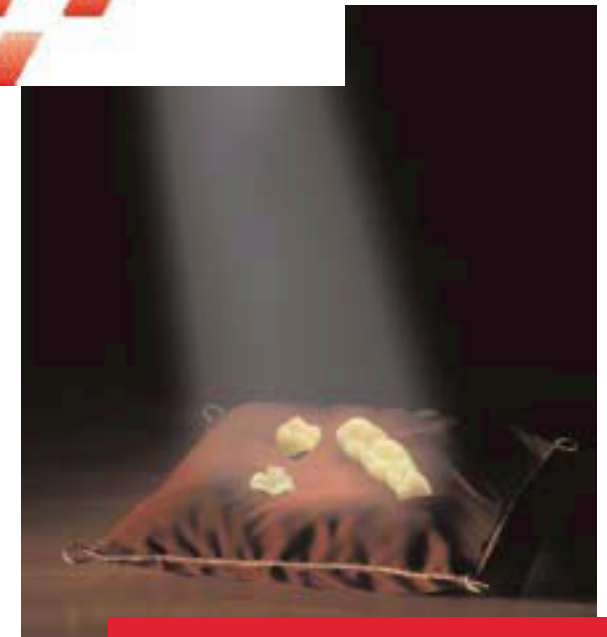

GC UNIFAST im Rampenlicht

- **HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT**
- **INTELLIGENTES ABBINDEVERHALTEN MIT MEMORY-EFFEKT**
- **SCHNELLE ODER STEUERBARE (VLC) VERARBEITUNGSZEIT**

GC UNIFAST

VOM PROBLEM ZUR LÖSUNG

Die provisorische Versorgung präparierter Zähne und Zahnlücken ist wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen festsitzenden Restauration. Funktionelle, parodontale und ästhetische Aspekte bei unterschiedlichsten Indikationen sind hierbei zu berücksichtigen.

Die Praxis zeigt, daß ein einziger dentaler Werkstoff diese vielfältigen Anforderungen nicht erfüllen kann.

Diese Überlegungen führten bei GC zur Entwicklung von **GC UNIFAST TRAD** und der lichthärtenden Variante **GC UNIFAST LC** mit exakt auf den Anforderungen der Anwender abgestimmten Eigenschaften.

Kurzfristige temporäre Versorgungen, die häufigste Indikation, stellen z.B. ganz spezifische Bedingungen an den Werkstoff, wie

- schnelle Versorgung
- problemlose Entnahme während der Abbindephase
- und kostengünstige Durchführung

GC UNIFAST¹, ein Methymethacrylat, erfüllt ideal diese Anforderungen. Die Vorteile dieses Werkstoffes entsprechen optimal den speziellen Forderungen der kurzfristigen temporären Versorgung von:

- Inlays oder Onlays,
- Einzelkronen
- und kurzspannige Brücken

¹ Die nachfolgende Ausführungen gelten für die Produkte **GC UNIFAST TRAD** und **GC UNIFAST LC**

DIE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der Werkstoff Methymethacrylat bestimmt entscheidend die Praxistauglichkeit von **GC UNIFAST**.

Die gute Benetzbarkeit von Pulver und Flüssigkeit fördern die einfache Herstellung einer blasenfreien homogenen Masse.

GC UNIFAST's typische gummielastische Konsistenz ermöglicht problemlos die Entnahme des Provisoriums selbst bei Präparationen mit kleinen Unterschnitten oder schwer zugänglichen Stellen.

Vorteilhaft auch das als Memory-Effekt bekannte Rückstellvermögen von **GC UNIFAST**. Dies verhindert wirkungsvoll die von anderen Materialien bekannte bleibende Deformation während der Entnahme.

Zur Erfüllung der an eine prothetische Versorgung gestellte ästhetischen Ansprüche stehen für beide **GC UNIFAST**-Varianten mehrere Farben zur Auswahl. Eine gute Farbadaption und Farbstabilität ermöglichen optimal den Wunsch nach zahnfarbene Provisorien.



Ästhetische Versorgungen



Einfache Entnahme

DIE PRODUKTVORTEILE

Hohe Wirtschaftlichkeit,

Ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis kennzeichnet Methymethacrylat, kein zusätzliches Zubehör erforderlich.

GC UNIFAST TRAD -

praxisgerechte Verarbeitungszeit

Auch dieser Aspekt, wichtig für eine wirtschaftliche und zeitsparende Patientenbehandlung, wurde bei **GC UNIFAST TRAD** vorbildlich berücksichtigt. Bereits 2'30" nach dem Mischen kann das Provisorium aus dem Mund entnommen werden.


GC UNIFAST LC - Arbeiten ohne Zeitdruck

Hier zeigt sich der Vorteil eines Spezialisten. Die Lichthärtung läßt dem Behandler Zeit zur Anpassung und Durchführung von Korrekturen. Ohne Zeitdruck werden selbst komplizierteste Indikationen optimal versorgt.

2'30"

GC UNIFAST TRAD

Praxisgerechte Verarbeitungszeit

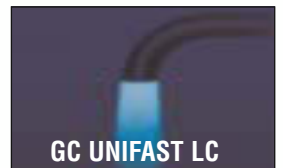

GC UNIFAST LC

Arbeiten ohne Zeitdruck