

Dental adhesive

TOTAL ETCH



- DE** Total Etch Adhäsiv.
EN Dental Adhesive: Total Etch.
ES Adhesivo Dental: Total Etch.
FR Adhésif dentaire : Total Etch.
IT Adesivo dentale: Total Etch.
PL System łączący do techniki całkowitego wytrawiania.
PT Adesivo Dentário: Total Etch.

DEUTSCH:

1. Isolieren und präparieren Sie den Zahn.
2. Applizieren Sie Ätzel gemäß den Herstelleranweisungen. Spülen Sie sorgfältig ab. Entfernen Sie überschüssige Flüssigkeit. Kavität feucht halten. 3. Bringen Sie ein Total Etch Adhäsiv auf und benetzen Sie alle Oberflächen. 4. Vorsichtig mit ölfreier Luft für 2 Sekunden verblasen, um das Lösungsmittel zu verdunsten. Glänzende Oberfläche hinterlassen. 5. Für zehn Sekunden Lichtstrahl hinterlassen. 6. Applizieren Sie das Komposit gemäß den Herstellerangaben.
Vorsichtsmaßnahmen: 1. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten, da es Entzündungen oder Hypersensibilisierungen hervorrufen kann. 2. Stoppen Sie die Anwendung, wenn Irritationen auftreten oder Allergien gegen Kunststoffe bekannt sind. 3. Gebrauch bei Raumtemperatur. 4. Bei nicht Benutzung Verschlusskappe aufsetzen.

ENGLISH:

1. Isolate and prepare tooth. 2. Apply Etch as per manufacturer's instructions. Wash thoroughly. Remove excess water. Keep moist. 3. Apply Dental Adhesive Total Etch to saturate all internal surfaces. 4. Blow gently with dry, oil free air for 2 seconds to evaporate solvent. Leave surface glossy. 5. Light cure for 10 seconds. 6. Apply composite as per manufacturer's instructions. Precautions: 1. Avoid prolonged contact with skin / soft tissues as it may cause inflammation / sensitisation. 2. Discontinue use if irritation occurs or if have known acrylic resin allergies. 3. Use at room temperature. 4. When not in use, replace cap.



ESPAÑOL:

1. Aísle y prepare el diente. 2. Aplique un ácido grabador según instrucciones del fabricante. Lave abundantemente. Elimine los excesos de agua. Deje la superficie húmeda. 3. Aplique Dental Adhesive Total Etch sobre todas las superficies a tratar. 4. Secar suavemente con aire seco y libre de aceite durante 2 seg. para evaporar el solvente. Deje la superficie brillante. 5. Fotopolimerice 10 segundos. 6. Aplique el composite según instrucciones del fabricante. Precautions: 1. Evite el contacto prolongado con la piel / tejidos blandos, ya que puede causar inflamación / sensibilización. 2. Suspnda el uso si se produce irritación o si es alérgico a la resina acrílica. 3. Uselo a temperatura ambiente. 4. Cuando no esté en uso, coloque de nuevo la tapa.

FRANÇAIS:

1. Isoler et préparer la dent. 2. Mordancer à l'aide d'un acide phosphorique à 37 % en suivant les recommandations du fabricant. Eliminer les excès d'eau. Garder humide. 3. Appliquer Dental Adhesive Total Etch en saturant toutes les surfaces internes. 4. Souffler doucement avec de l'air sec, non gras pendant 2 secondes pour évaporer le dissolvant. Laisser la surface brillante. 5. Photopolymériser pendant 10 secondes. 6. Appliquer le composite en suivant les instructions du fabricant. Précautions: 1. Eviter tout contact prolongé avec les yeux / tissus mous car cela pourrait causer une certaine sensibilité ou inflammation. 2. Interrompre l'utilisation en cas d'irritation ou d'allergies connue à résine d'acrylique. 3. Utiliser à températures ambiante. 4. Reboucher après chaque utilisation.


ITALIANO:

1. Isolare e preparare il dente. 2. Applicare il

mordenzante seguendo le istruzioni del produttore. Sciacquare accuratamente. Rimuovere l'acqua in eccesso. Mantenere idratato. 3. Applicare Dental Adhesive Total Etch saturando tutte le superfici interne. 4. Fare evaporare il solvente con un leggero getto d'aria senza oli per 2 secondi. Lasciare la superficie lucida. 5. Fotopolimerizzare per 10 secondi. 6. Applicare il composito seguendo le istruzioni del produttore. 1. Evitare il contatto prolungato con la cute ed i tessuti molli in quanto può causare infiammazioni / sensibilizzazione. 2. Interrompere l'utilizzo in caso di irritazione o se si viene a conoscenza di allergie alle resine acriliche. 3. Utilizzare a temperatura ambiente. 4. Richiudere dopo l'utilizzo.

POLSKI:

1. Odizolować i przygotować ząb. 2. Nałożyć środek wytrawiający zgodnie z instrukcją producenta. Dokładnie przemyć. Usunąć nadmiar wody. Pozostawić powierzchnię wilgotną. 3. Nałożyć środek Dental Adhesive Total Etch, aby nasyczyć wszystkie powierzchnie wewnętrzne. 4. Przedmuchać delikatnie przez 2 sekundy suchym, odluszczającym powietrzem, aby odparować rozpuszczalnik. Pozostawić powierzchnię błyszczącą. 5. Utwardzać światłem przez 10 sekund. 6. Nałożyć kompozyt zgodnie z instrukcją producenta. Środki ostrożności: Unikaj przedłużonego kontaktu ze skórą i tkankami miękkimi/błonami śluzowymi, gdyż może wywoływać reakcję zapalną lub podrażnienie. 2. Natychmiast przerwać stosowanie materiału jeśli dojdzie do reakcji alergicznej lub w przypadku uczulenia na żywice metakrylowe. Przechowywać w temperaturze pokojowej. W przypadku nie stosowania materiału, dobrze zamknąć.

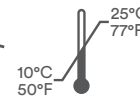

PORTUGUÊS:

1. Isole e prepare dente. 2. Aplique ácido fosfórico de acordo com as instruções do fabricante. Lave bem e retire o excesso de água. Mantenha úmido. 3. Aplique Dental Adhesive Total Etch preenchendo todas as superfícies internas. 4. Aplique um leve jato de ar (livre de óleo) por 2 segundos para evaporar o solvente. Deixe a superfície brilhante. 5. Use o fotopolimerizador durante 10 segundos. 6. Aplique o composito de acordo com as instruções do fabricante. Precauções: 1. Evitar contato prolongado com a pele / tecidos moles, pois isto pode causar inflamação / sensibilidade. 2. Descontinue o uso se ocorrer irritação ou se tiver alergia conhecida a resina acrílica. 3. Utilizar em temperatura ambiente. 4. Quando não em uso, recolocar a tampa.

COMPOSITION:

Acrylic monomer, Acetone, Fluoride, Stabilizer.

INDICATIONS: I) All direct restorative composites. II) Compomers. III) Composite / Ceramic* / Metal* / Porcelain* repairs. *Bonding surface requires pre-treatment with a silane primer.

FIRST AID:

Eye: Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes. Seek medical attention. Skin: Wash thoroughly with water. If irritation (redness, rash, blistering) develops, seek medical attention. Ingestion: Drink plenty of water/milk. Seek medical attention. Inhalation: No symptoms expected.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR USE BY DENTISTS ONLY.



Full instructions and more information available at www.proclinic-products.com



CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL
Via Felice Cavallotti, 15
20122 Milano (Italy)

