


# Nano dental adhesive

## SELF-ETCH

1 bottle  
5 ml



- DE** Self-Etch-Bond Dentalklebstoff
- EN** Self-etch dental adhesive
- ES** Adhesivo universal de autograbado
- FR** Adhésif auto mordant
- IT** Adesivo dentale automordante
- PL** Samowytrawiający, światłoutwardzalny materiał łączący
- PT** Adesivo universal autogravador

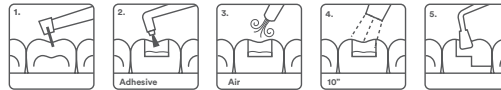

#### DEUTSCH:

1. Isolieren und präparieren Sie den Zahn. 2. Tragen Sie den Proclinic Expert Self-Etch-Bond Dentalklebstoff auf, und benetzen Sie gleichmäßig alle preparierten Oberflächen. 3. Mit ölfreier Luft 5 Sekunden lang sorgfältig verblasen und eine glänzende Oberfläche hinterlassen. 4. Lichtpolymerisation für 10 Sekunden. 6. Applizieren Sie das Komposit gemäß den Herstellerangaben. Vorsichtsmaßnahmen: 1. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten, da es Entzündungen oder Hypersensibilisierungen hervorrufen kann. 2. Stoppen Sie die Anwendung, wenn Irritationen auftreten oder Allergien gegen Kunststoffe bekannt sind. 3. Gebrauch bei Raumtemperatur. 4. Bei nicht Benutzung Verschlusskappe aufsetzen.

#### ENGLISH:

1. Isolate and prepare tooth. 2. Apply Proclinic Expert Self-etch Dental Adhesive to saturate all internal surfaces and leave in place for 20 seconds. 3. Blow firmly with dry, oil free air for 5 seconds. Leave surface glossy. 4. Light cure for 10 seconds. 5. Apply composite as per manufacturer's instructions. Precautions: 1. Avoid prolonged contact with skin / soft tissues as it may cause inflammation / sensitisation. 2. Discontinue use if irritation occurs or if have known acrylic resin allergies. 3. Use at room temperature. 4. When not in use, replace cap.

#### ESPAÑOL:

1 Aislar y preparar el diente. 2 Aplique Proclinic Expert Self-etch Dental Adhesive sobre todas las superficies a restaurar y deje actuar durante 20

segundos. 3 Sople el adhesivo para distribuirlo de forma homogénea durante 5 seg con aire seco y libre de aceite. Deje la superficie ligeramente brillante. 4 fotopolimerice 10 segundos. 5. Aplique el composito según instrucciones del fabricante. Precauciones: 1. Evite el contacto prolongado con la piel / tejidos blandos, ya que puede causar inflamación / sensibilización. 2. Suspnda el uso si se produce irritación o si es alérgico a la resina acrílica. 3. Úselo a temperatura ambiente. 4. Cuando no esté en uso, coloque de nuevo la tapa.

#### FRANÇAIS:

1. Isoler et préparer la dent. 2. Proclinic Expert Self-etch Dental Adhesive pour saturer toutes les surfaces internes et laisser en place pendant 20 secondes. 3. Souffler fermement avec de l'air sec, non gras pendant 5 secondes. Laisser la surface brillante. 4. Photopolymériser pendant 10 secondes. 5. Appliquer le composite en suivant les recommandations du fabricant. Précautions: 1. Éviter tout contact prolongé avec les yeux / tissus mous car cela pourrait causer une certaine sensibilité ou inflammation. 2. Interrompre l'utilisation en cas d'irritation ou d'allergies connue à résine d'acrylique. 3. Utiliser à températures ambiante. 4. Reboucher après chaque utilisation.

#### ITALIANO:

1. Isolare e preparare il dente. 2. Applicare Proclinic Expert Self-etch Dental Adhesive saturando le superfici interne e lasciare agire per 20 secondi. 3. Asciugare con aria secca priva di olio per 5 secondi. Lasciare la superficie lucida. 4. Fotopolimerizzare per 10 secondi. 5. Applicare il composito seguendo le istruzioni del produttore. Precauzioni: 1. Evitare


il contatto prolungato con la cute ed i tessuti molli in quanto può causare infiammazioni / sensibilizzazione. 2. Interrompere l'utilizzo in caso di irritazione o se si viene a conoscenza di allergie alle resine acriliche. 3. Utilizzare a temperatura ambiente. 4. Richiudere dopo l'utilizzo.

#### POLSKI:

1. Odizolować i przygotować ząb. 2. Nasączyć wszystkie wewnętrzne powierzchnie produktem Proclinic Expert Self-etch Dental Adhesive i pozostawić go na 20 sekund. 3. Przedmuchać dokładnie przez 5 sekund suchym, odtłuszczonym powietrzem. Pozostawić powierzchnię błyszczącą. 4. Utwardzać światłem przez 10 sekund. 5. Nałożyć kompozyt zgodnie z instrukcją producenta. Środki ostrożności: Unikaj przedłużonego kontaktu ze skórą i tkankami miękkimi/błonami śluzowymi, gdyż może wywoływać reakcję zapalną lub podrażnienie. 2. Natychmiast przerwać stosowanie materiału jeśli dojdzie do reakcji alergicznej lub w przypadku uczulenia na żywice metakrylowe. Przechowywać w temperaturze pokojowej. W przypadku nie stosowania materiału, dobrze zamknąć.

#### PORTUGUÊS:

1. Isolar e preparar dente. 2. Aplique Proclinic Expert Self-etch Dental Adhesive preenchendo todas as superfícies internas e aguarde 20 segundos. 3. Aplique um jato de ar seco (livre de óleo) por 5 segundos. Deixe a superfície brilhante. 4. Utilize o fotopolimerizador por 10 segundos. 5. Aplique o composito de acordo com as instruções do fabricante. Precauções: 1. Evitar contato prolongado com a pele / tecidos moles, pois isto pode causar inflamação / sensibilidade. 2. Descontinue o uso

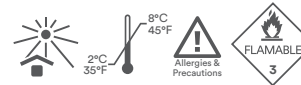

se ocorrer irritação ou se tiver alergia conhecida a resina acrílica. 3. Utilizar em temperatura ambiente. 4. Quando não em uso, recolocar a tampa.

#### COMPOSITION:

Phosphoric acid ester monomer, Dimethacrylate monomer, Monomethacrylate monomer, Silicon dioxide filler, Water, Acetone, Photoinitiators, Stabilizer, Sodium Fluoride.

INDICATIONS: I) Direct filling restorations using light-cured composite and compomers. II) Composite repair of porcelain and hybrid ceramic restorations. III) Sealing exposed root surfaces causing hypersensitivity. IV) Cavity sealing prior to placement of indirect restorations. V) Core build-ups using light cure or dual cure composites. VI) Composite repair.

#### FIRST AID:

Eye: Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes. Seek medical attention. Skin: Wash thoroughly with water. If irritation (redness, rash, blistering) develops, seek medical attention. Ingestion: Drink plenty of water/milk. Seek medical attention. Inhalation: No adverse reaction is expected for a small quantity. If signs / symptoms develop, seek medical attention.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR USE BY DENTISTS ONLY.

KEEP REFRIGERATED UNTIL USE. Allow product to reach room temperature just before use.

Full instructions and more information available at [www.proclinic-products.com](http://www.proclinic-products.com)

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL  
Via Felice Cavallotti, 15  
20122 Milano (Italy)

CE  
0476