



... la solution esthétique pour les
patients parodontalement compromis



everStick®PERIO
de GC

Renfort en fibre pour
contention parodontale

GC



everStick®PERIO

... la solution esthétique pour les patients parodontalement compromis



La contention parodontale avec everStickPERIO peut être utilisée avec succès dans le cadre d'un traitement parodontal. Il a été démontré que les dents dont le parodonte est sain, mais sévèrement réduit, peuvent être **maintenues à l'aide d'une attelle**. Avec everStickPERIO, **vous avez le choix entre une attelle rigide ou plus flexible en fonction de la situation clinique**. Si l'attelle est collée de manière interdentaire, vous obtiendrez une attelle plus rigide, indiquée par exemple en cas de fracture radiculaire. Un autre avantage est que l'attelle peut facilement être remodelée, si nécessaire.

Esthétiques

Très peu invasifs

Fiables




Prof. Peumans, Belgique

Pourquoi everStickPERIO garantit-il l'attelle idéale à votre patient ?

Bénéficiant des caractéristiques d'un produit unique, alliées à une vaste expérience dans le domaine de la recherche et à une longue expertise clinique, everStickPERIO **est une solution de contention inégalée en matière de résistance et de fiabilité**. Les fibres everStick présentent **une résistance à la flexion aussi élevée que celles d'un cobalt métallique au chrome coulé**, mais leur **module d'élasticité est très proche de celui de la dentine**. Cette élasticité peut être **bénéfique pour le tissu parodontal environnant**, car les charges sont réparties plus naturellement que dans une construction totalement rigide, comme une contention métallique.



Produit doté d'une structure IPN* brevetée unique...

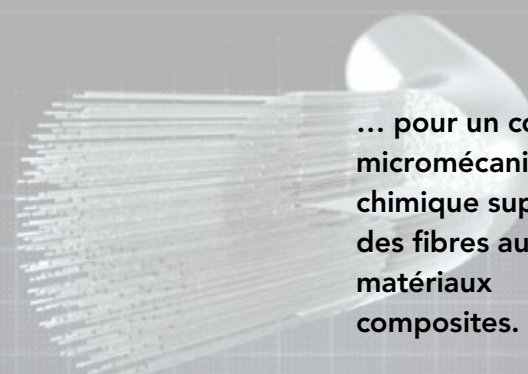

... pour un collage micromécanique et chimique supérieur des fibres aux matériaux composites.

* Réseau Polymère Interpénétrant

Cette technologie repose sur la capacité de la matrice de polymères (PMMA et bis-GMA) à se dissoudre partiellement dans la résine utilisée pour le collage, pour une restauration finale renforcée.

Durabilité supérieure

Soutien efficace

Comfortable

Facile à **retirer**

Pas de **contrainte de torsion**

Comment combiner une attelle parodontale et une fermeture de diastème ?



Situation initiale

CONSEIL ! L'appareil de rétention doit être placé aussi près que possible des bords incisifs, tout en tenant compte de l'occlusion.



Mordançage

CONSEIL ! Il est préférable de mordancer une zone légèrement plus grande que nécessaire, plutôt que trop petite. L'utilisation d'une digue en caoutchouc est recommandée.



Collage

CONSEIL ! Toute la longueur de l'attelle doit être collée aux surfaces des dents.



Photopolymérisation

CONSEIL ! Les espaces interdentaires peuvent également être collés pour obtenir une attelle plus rigide.



Appliquer G-ænial Universal Flo

CONSEIL ! G-ænial Universal Flo doit être appliqué en une couche continue. Ne pas photopolymériser à ce stade !



Placer la fibre

CONSEIL ! Comprimer aussi la fibre dans les zones proximales, en s'assurant que les espaces interdentaires ne sont pas bloqués.



Recouvrir avec G-ænial Universal Flo

CONSEIL ! Une fois que la fibre a été initialement traitée, recouvrir avec le composite fluide et s'assurer qu'elle est totalement recouverte.




Boîtier final

CONSEIL ! G-ænial Universal Flo (le composite fluide utilisé pour placer la fibre) peut aussi être utilisé pour fermer le diastème.

La route du succès...

...pour créer une attelle parodontale esthétique et fiable

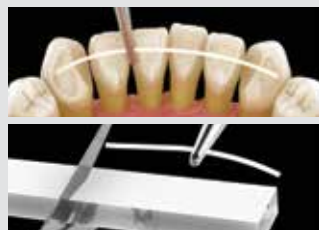

1. Mesurer et couper la fibre.



2. Nettoyer les dents



3. Mordancer la zone à coller pendant 45 à 60 secondes



4. Coller et photopolymériser



5. Appliquer le composite fluide ; ne pas photopolymériser



6. Placer la fibre et photopolymériser chaque dent pendant 5 à 10 secondes



7. Recouvrir avec du composite fluide



8. Photopolymériser pendant 40 secondes par dent et effectuer la finition

Conditionnements



Recharge 900822 everStickPERIO 2 x 12 cm

Recharge 900832 everStickPERIO 1 x 8 cm

Produits associés



GC G-ænial® Universal Flo



GC G-ænial® Bond

everStickPERIO

Form	Former un faisceau unidirectionnel de fibres de verre E
Diamètre	~1.1-1.3mm
Quantité de fibres	~2 000 fibres de verre individuelles par faisceau

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC BENELUX B.V.

Edisonbaan 12
NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.

9 bis, Avenue du Bouton d'Or –
BP 166
F-94384 Bonneuil sur Marne Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
http://france.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office
Bergstrasse 31
CH-8890 Flums
Tel. + 41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com

GC

