

GARANTIE INCLUANT UNE GARANTIE SOUS ENTENDUE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE EN PARTICULIER. L'utilisateur est responsable de déterminer le caractère approprié du produit pour son application. Si le produit est défectueux durant sa période de garantie, votre unique recours et la seule responsabilité de Spident® sera la réparation ou le remplacement du produit de Spident®

Limite de Responsabilité

Sauf où la loi l'interdit, Spident® n'engage pas sa responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de ce produit que ce soit de manière directe, indirecte, spéciale, accidentelle, importante quelque soit la théorie avancée, incluant la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité absolue.

IT OTTURAZIONE PROVVISORIA INLAY/ONLAY (UNIVERSAL)

Informazioni Generali

Otturazione provvisoria Inlay/Onlay (Universal) è un materiale di riempimento provvisorio di fotopolimerizzazione per protesi provvisorie. È utile per tutti i tipi di otturazioni provvisorie protettive per le tecniche di intarsio inlay e onlay. È un veloce fotopolimerizzabile a uno stato altamente elastico il che lo rende adatto per le preparazioni di intarsio profondo con pareti parallele. È anche molto adatto per sigillare i canali di accesso alle viti dell'impianto. Può essere facilmente rimosso in un unico pezzo.

Composizione

Matrice Organica: UDMA, TEDGMA

Additivi: Iniziatore, Catalizzatore, Stabilizzatore, Altro

Indicazione

Otturazione provvisoria di Inlay / Onlay
Sigillatura Cavità di Accesso Vite Implantare

Tempistica

Fotopolimerizzabile 20 sec @ 2 mm di spessore

Controindicazioni

Se non è possibile stabilire un campo di lavoro asciutto o non può essere applicata la tecnica di applicazione prevista. Se il paziente è risaputo essere allergico ad uno qualsiasi degli ingredienti.

Informazioni Precauzionali

- Il prodotto contiene sostanze che in alcune persone potrebbero causare una reazione allergica da contatto con la pelle.
- Per ridurre ogni rischio di reazione allergica, ridurre al minimo l'esposizione a materiali non polimerizzati. In caso di contatto prolungato, sciacquare con grandi quantità di acqua. In caso di reazione allergica, consultare un medico se necessario

Applicazione

1. Pulire e asciugare la cavità che deve essere ripristinata prima di applicare Otturazione provvisoria Inlay/Onlay (Universal). Se la preparazione della cavità è sfavorevole, si consiglia di usare una matrice.
2. Rimuovere il coperchio dalla siringa. Ruotare l'estrusore in senso orario per erogare una quantità sufficiente.
3. Posizionare Otturazione provvisoria Inlay/Onlay (Universal) nella cavità utilizzando una spatola o un altro strumento idoneo.
4. Plasmare il restauro, lasciando minimo eccesso.
5. Con incrementi di 4 millimetri si può curare in 10-20 secondi con una fotopolimerizzazione standard (a circa 650 mW/cm²).
6. Rimuovere la matrice se necessario.
7. Controllare l'occlusione e regolare se necessario.

Conservazione e Uso

Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato a temperatura ambiente. Se viene utilizzato il deposito refrigerato consentire al prodotto di arrivare a temperatura ambiente prima dell'uso. La conservabilità a temperatura ambiente è di 36 mesi. Per la data di scadenza, vedere la confezione esterna. Le temperature ambiente abitualmente superiori ai 25° C/77° F potrebbero ridurre la durata della conservazione. Non esporre materiali ristoratori in prossimità di prodotti contenenti Eugenolo. Disinfettare il prodotto utilizzando un processo di disinfezione di livello intermedio (contatto con liquido) come raccomandato dal CDC e approvato da ADA. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003(Vol. 52; No.RR-17), Centers for Disease Control and Prevention.

Smaltimento

Vedere la Material Safety Data Sheet / Scheda per la Sicurezza (disponibile su www.spident.co.kr o tramite la filiale locale) per informazioni sullo smaltimento.

Informazione per il cliente

Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate nel presente foglio di istruzioni.

Attenzione

La Legge Federale degli Stati Uniti limita questo dispositivo per la vendita o l'uso su ordine di un dentista.

Garanzia

Spident® garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti di materiale e produzione. Spident® NON RICONOSCE NESSUN'ALTRA GARANZIA INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione dell'utente. Se questo prodotto risulta difettoso entro il periodo di garanzia, è vostro esclusivo diritto e Spident® ha l'unico obbligo di riparare o sostituire il prodotto della Spident®

Limitazione di responsabilità

Salvo laddove proibito dalla Legge Spident® non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto, siano essi diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, qualunque sia la teoria affermata, compresa garanzia, contratto, negligenza o responsabilità oggettiva.

PT MATERIAL DE PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO PARA TÉCNICAS DE INCRUSTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

Informação Geral

Material de Preenchimento Temporário para técnicas de incrustação e implantação é um material de preenchimento temporário fotopolimerizável para restaurações temporárias. É útil para quaisquer tipos de preenchimentos temporários protetores para técnicas de incrustação e implantação. É rapidamente polimerizável para um estado altamente elástico tornando-o adequado para preparações de incrustação profundas com paredes paralelas. É também muito adequado para selar canais de acesso a parafuso de implante. Pode ser facilmente removido numa só peça.

Composição

Matriz Orgânica: Diuretano dimetacrilato, Dimetacrilato de trietilenoglicol.

Additivos: Iniciador, Catalisador, Estabilizador, Outros

Indicação

Preenchimento temporário de incrustação/implantação
Selagem de cavidade de acesso a parafuso de implante

Tempo

Fotopolimerização de 20 seg. a 2 mm de espessura.

Contraindicações

Se não puder ser estabelecido um campo de trabalho seco ou se a técnica de aplicação estipulada não puder ser aplicada. Se o paciente tiver uma alergia conhecida a qualquer um dos ingredientes.

Advertências e Precauções

- O produto contém substâncias que podem causar uma reação alérgica em contacto com a pele, em alguns indivíduos.
- Para reduzir o risco de reação alérgica, minimize a exposição a materiais não curados. Se ocorrer um contacto prolongado, enxague com grandes quantidades de água. Se ocorrer uma reação alérgica, procure cuidado médico conforme necessário.

Aplicação

1. Limpe cuidadosamente e seque a cavidade a ser restaurada antes de aplicar Material de Preenchimento Temporário para técnicas de incrustação e implantação. Se a preparação da cavidade for desfavorável é aconselhável usar uma matriz.
2. Remova a tampa da siringa. Torça o extrusor no sentido dos ponteiros do relógio para dispensar uma quantidade suficiente.
3. Coloque Material de Preenchimento Temporário para técnicas de incrustação e implantação na cavidade através de uma espátula ou outro instrumento adequado.
4. Contorne a restauração, deixando um excesso mínimo.
5. Podem ser fotopolimerizados acréscimos de 4 mm em 10-20 segundos com uma luz de fotopolimerização padrão (a cerca de 650 mW/cm²).
6. Remova a matriz se necessário.
7. Verifique a oclusão e ajuste se necessário.

Armazenamento e Utilização

Este produto foi concebido para ser utilizado à temperatura ambiente. Se utilizar armazenamento refrigerado, permita que o produto atinja a temperatura ambiente antes de o utilizar. O prazo de validade à temperatura ambiente é de 36 meses. Verifique a embalagem externa para consultar a data de validade. Temperaturas ambiente sistematicamente superiores a 25°C/77°F podem reduzir o prazo de validade. Não expor os materiais de restauração a proximidade com produtos que contêm Eugenol. Desinfetar o produto através de um processo de desinfecção de nível intermédio (contacto líquido) como recomendado pelo CDC e aprovado pela ADA. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings (Orientações Gerais para Controlo de Infecções em Cuidados de Saúde Dentários) – 2003(Vol. 52; No.RR-17), Centers for Disease Control and Prevention.

Descarte

Consulte a Ficha de Dados de Segurança de Material (disponível em www.spident.co.kr ou na sua filial local) para informação sobre descarte.

Informação de Cliente

Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação que divirja da informação fornecida neste folheto informativo.

Advertência

A lei federal norte-americana restringe este equipamento à venda ou utilização por um profissional dentário.


Garantia

A Spident® garante que este produto vai estar livre de defeitos de material ou de fabrico. A Spident®, NÃO OFERECE QUALQUER OUTRA GARANTIA INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A FIM ESPECÍFICO. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto para aplicação. Se este produto for defeituoso durante o período de garantia, a única solução disponível e a única obrigação da Spident® será reparar ou substituir o produto Spident®.

Limitação de Responsabilidade

Exceto onde proibido por lei, a Spident®, R não será responsabilizada por qualquer perda ou dano causado por este produto, quer seja direto, indireto, especial, acidental ou decorrente, independentemente da teoria declarada, incluindo garantia, contrato, negligência ou estrita responsabilidade.

SPIDENT CO., LTD.
203 & 312, Korea Industrial Complex
722 Gojan-Dong, Namdong-Gu
Incheon 405-821 (Korea)

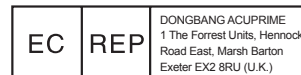

Última revisión: 07.16