

Unissons nos forces !



**Les solutions
intelligentes**
de GC pour
tous vos défis en
matière d'adhésion

GC

Comment choisir le matériau d'assemblage optimal ?

Aujourd'hui plus que jamais, vous avez l'embarras du choix lors de la planification et de la mise en place de restaurations indirectes. Dès l'instant où le patient arrive, vous devez prendre en compte divers critères avant de décider du plan de traitement.

En tant que praticien, vous savez qu'aucun patient ne se ressemble et il est donc important de suivre une approche holistique dans la planification du traitement en fonction du choix de la restauration indirecte et du type de préparation... pour s'adapter au mieux à la situation clinique du patient.

Une partie importante de ce processus réside dans le choix du matériau d'assemblage.



**La question clé que vous devez vous poser avant de prendre une décision est :
Quel est pour moi le matériau d'assemblage idéal ? Celui qui :**

Protège
la structure
de la dent

Protège
la restauration
prothétique

La sélection du matériau d'assemblage optimal garantit un beau sourire et une satisfaction à long terme du patient.




Découvrez les solutions 'HIGH 5' pour tous vos défis en matière d'adhésion

Avec plus de 95 ans d'expérience et l'une des gammes de produits les plus complètes, nous sommes convaincus que nous sommes le partenaire idéal pour vous guider vers la solution la plus appropriée.

Parce qu'après tout, une adhésion efficace est le succès de toute une équipe.

Chacune des solutions GC est adaptée aux différentes situations cliniques et offre des caractéristiques uniques comme les propriétés physiques, le temps de travail, le protocole d'utilisation, la libération de fluorure, et le coût...

Unissons nos forces !

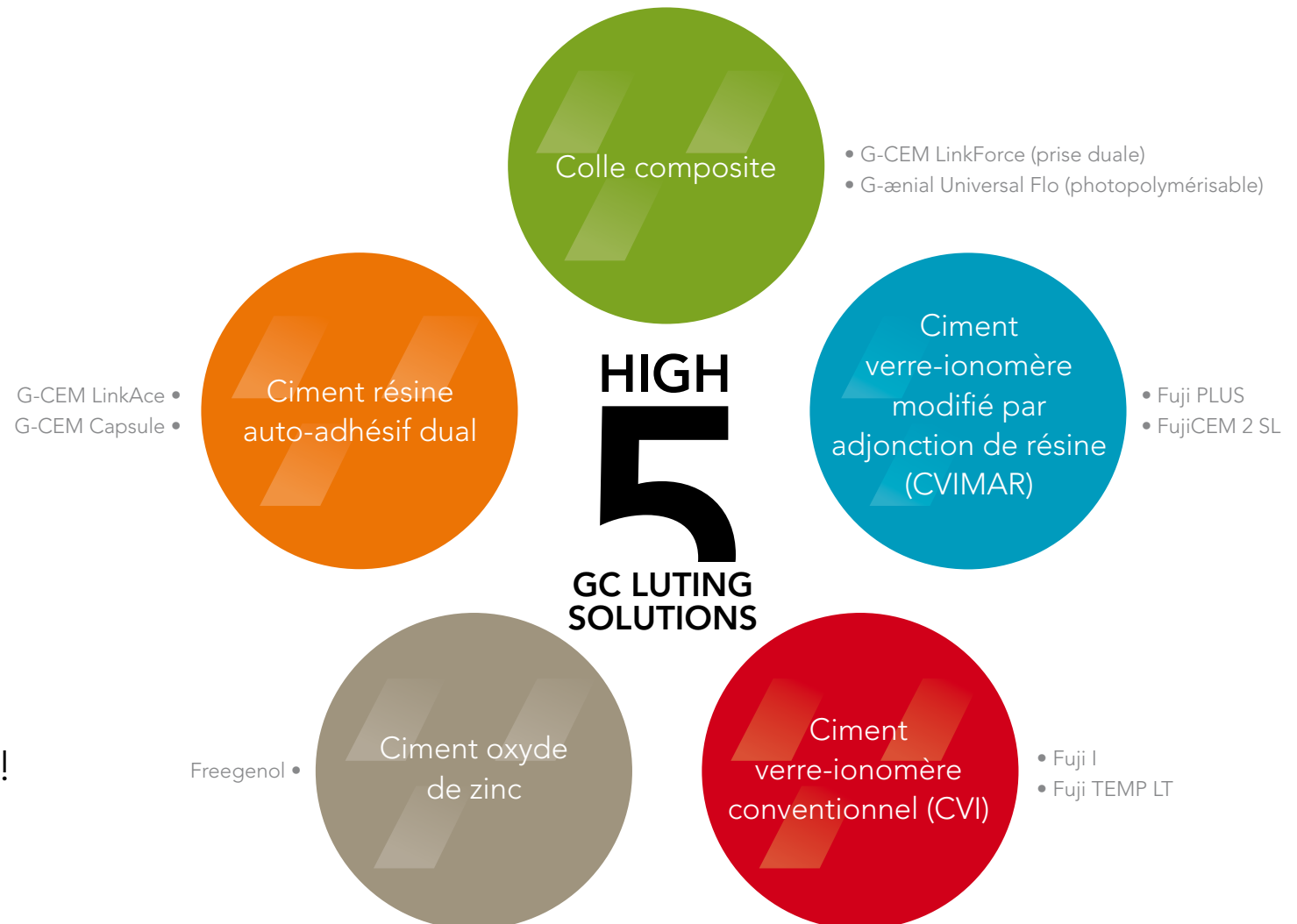



En fonction de la situation clinique, la première question que vous devez vous poser est... dois-je SCELLER ou dois-je COLLER ?

Quand sceller ?

Le scellement est généralement utilisé lorsque les préparations permettent une rétention mécanique adéquate.

Les aspects cliniques suivants vont définir votre choix pour la procédure optimale de SCELLEMENT :

Préparation rétentive



Sélectionner un **CVI** ou un **CVIMAR** qui offre le meilleur équilibre entre facilité d'utilisation, rapidité et protection de la dent.

Isolation impossible



Sélectionner un **CVI** ou un **CVIMAR** car ils présentent une tolérance à l'humidité et une excellente adhésion chimique à la dent.

Nécessité esthétique modérée



Sélectionner un **CVI** ou un **CVIMAR** quand votre situation clinique et/ou le substrat choisi (zircone, métal & céramo-métal) ne nécessite pas un ciment d'une esthétique élevée.

Situations cliniques particulières



Sélectionner un **CVI** ou un **CVIMAR** pour les patients présentant un risque carieux élevé, également en gériatrie.

Vos options :

Ciment verre ionomère conventionnel (CVI) - Solution GC : **Fuji I**

Ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine (CVIMAR) - Solutions GC : **Fuji PLUS & FujiCEM 2**

"La plupart du temps, les limites de la préparation sont sous-gingivales et le contrôle de l'humidité s'avère difficile."

DR. LUCILE DAHAN, FRANCE

Quand coller ?

Le collage est généralement utilisé lorsqu'une adhésion supplémentaire est nécessaire ou lorsque l'esthétique est primordiale.

Préparation non rétentive



Sélectionner une **colle composite** lorsque la préparation est non rétentive. Un ciment **résine auto-adhésif** dual (pour sa facilité d'utilisation) peut être utilisé pour les préparations rétentes modérées.

Isolation possible



Sélectionner un ciment **résine auto-adhésif** dual ou une **colle composite** lorsqu'un champ sec peut être assuré.

Besoin esthétique élevé



Sélectionner un ciment **résine auto-adhésif** dual ou une **colle composite** pour leur esthétique élevée.

Adhésion élevée indispensable



Sélectionner une **colle composite** pour coller les facettes et céramiques hybrides (ex : CERASMART).

Vos options :

Ciment résine auto-adhésif dual - Solutions GC : **G-CEM LinkAce & G-CEM Capsule**

Colle composite - Solutions GC : **G-CEM LinkForce (prise duale) & G-ænial Universal Flo (photopolymérisable)**

Découvrez toutes nos solutions !

Avec l'un des portefeuilles les plus complets de solutions d'assemblage, GC vous aide à redonner le sourire à vos patients.



Nos solutions de scellement permanent

Ciments à base de verre ionomère

Fuji I



Ciment verre-ionomère (CVI)

- Solution économique
- Ciment sans résine | [Page 7](#)



Fuji PLUS



Ciment verre-ionomère modifié par adjonction de résine (CVIMAR)

- Succès clinique à long terme
- Sans souci! | [Page 8](#)



FujiCEM 2



Ciment verre-ionomère modifié par adjonction de résine (CVIMAR)

- Utilisation facile
- Polyvalent | [Page 9](#)



Ciments à base de résine composite

G-CEM LinkAce & G-CEM Capsule



Ciment résine auto-adhésif dual

- Mode chémo polymérisable efficace
- Facilité d'utilisation | [Page 10](#)



G-CEM LinkForce



Colle composite (polymérisation duale)

- Adhésion élevée
- Esthétique élevée | [Page 11](#)



G-ænial Universal Flo



Composite injectable pour le collage des facettes (photopolymérisation)

- Esthétique élevée
- Propriétés physiques exceptionnelles | [Page 12](#)



Nos solutions de scellement provisoire

Oxyde de zinc

Freegenol



[Page 13](#)



Ciment verre ionomère conventionnel

Fuji TEMP LT



[Page 13](#)



GC Fuji I

Ciment Verre Ionomère conventionnel



Solution économique



Sans résine pour les patients allergiques aux méthacrylates (résines)



Bonne solution pour les piliers implantaires.
Retrait aisé des excès réduisant le risque de péri-implantite

Source : Dr. Emmanuel d'Incau, France

La solution de scellement biocompatible et sans résine avec un recul clinique de 25 ans. Fuji I, le premier ciment de scellement de GC, est largement utilisé dans le monde entier.

Découvrez pourquoi Fuji I est toujours un matériau de choix.

Avantages cliniques déterminants

- Adhésion chimique à la **structure de la dent**, garantie d'un excellent **scellement marginal**
- Une solution **tolérante à l'humidité** lorsqu'une isolation ne peut être assurée
- **Rapide et simple** sans recours au mordantage ou agent de collage
- **Ciment sans résine** pour patients allergiques aux méthacrylates (résines)
- Pratiquement **aucune sensibilité post-opératoire** : sans risque pour la pulpe

Avantages pratiques

- Une solution **économique** et **facile à utiliser** pour les restaurations à base de métal
- Coût moyen: €€€€€

Applications cliniques

	Métal / céramo-métal	Zircone / Alumine
Inlays / onlays	●	N.C.
Couronnes / bridges	●	●
Tenons / inlay-cores	●	-

"Fuji I est parfaitement indiqué pour le scellement définitif des éléments fixes sur pilier implantaire. L'élimination des excès est simple et facile à contrôler, ce qui réduit le risque des péri-implantites".

DR. EMMANUEL D'INCAU, FRANCE

GC Fuji PLUS

Ciment verre-ionomère modifié
par adjonction de résine



Succès clinique
à long terme



Equilibre parfait entre
protection de la dent et
adhésion



Retrait aisé des excès



Solution pour des résultats
prévisibles et sans souci

Efficace et éprouvé depuis plus de 20 ans – une solution prévisible, sans souci. GC Fuji PLUS est l'un de nos produits les plus connus et est considéré comme LE matériau de référence dans sa catégorie, offrant la protection dentaire d'un ciment verre-ionomère associée à la résistance et l'esthétique d'une colle composite.

Avantages cliniques déterminants

- **Adhésion chimique** à la structure de la dent, garantie d'un excellent **scellement marginal**
- **Une solution tolérante à l'humidité** lorsqu'une isolation ne peut être assurée
- **Rapide et simple** : ni mordantage ni agent de collage
- Une consistance caoutchouteuse **pour un retrait aisé des excès**
- Pratiquement **aucune sensibilité post-opératoire** : sans risque pour la pulpe

Avantages pratiques

- **Performances prévisibles et éprouvées** pour la plupart des cas quotidiens
- Disponibles en différentes teintes
- Existe également dans une version avec un temps de travail étendu (EWT) pour les bridges longue-portée
- Coût moyen: €€€€€

Applications cliniques

	Métal / céramo-métal	Céramiques feldspathiques*	Disilicate de lithium	Zircone / Alumine	Composite / composite fibro-renforcé
Inlays / onlays	●	● (inlays)	●	N.C.	●
Couronnes / bridges	●	-	●	●	●
Tenons / inlay-cores	●	N.C.	N.C.	●	●

"Notre cabinet utilise Fuji PLUS depuis près de deux décennies. Je ne me souviens pas avoir rencontré d'échec et nous avons scellé plus de 5000 couronnes et bridges !"

DR. HAN HEESSEN, PAYS-BAS

*Céramiques feldspathiques et céramiques feldspathiques renforcées à la leucite

GC FujiCEM 2 SL

Ciment verre-ionomère modifié
par adjonction de résine

La simplicité est l'innovation de ce premier verre-ionomère modifié par adjonction de résine et présenté en pâte/pâte. Ce ciment de scellement facile à utiliser et universel est le partenaire idéal de votre travail quotidien.



Mélange manuel

Automix



Distribution facile

Retrait aisé des excès

Source : Dr. Frédéric Raux, France

Avantages cliniques déterminants

- **Adhésion chimique** à la structure de la dent, garantie d'un excellent **scellement marginal**
- **Une solution tolérante à l'humidité** : « un plus » lorsque le contrôle de l'humidité ne peut pas être assuré
- **Rapide et simple** : ni mordantage ni agent de collage
- Une consistance caoutchouteuse **pour un retrait aisé des excès**
- Pratiquement **aucune sensibilité post-opératoire** : sans risque pour la pulpe

Avantages pratiques

- Mélange manuel ou automix : vous avez le choix !
- Coût moyen: €€€€€

Applications cliniques

	Métal / céramo-métal	Céramiques feldspathiques*	Disilicate de lithium	Zircone / Alumine	Composite / composite fibro-renforcé
Inlays / onlays	●	● (inlays)	●	N.C.	●
Couronnes / bridges	●	-	●	●	●
Tenons / inlay-cores	●	N.C.	N.C.	●	●

“Pourquoi choisir une procédure de collage sensible à la technique quand vous pouvez profiter de la fantastique liaison chimique à la dentine, du scellement marginal et de la résistance d'un verre-ionomère modifiée à la résine ?

FujiCEM 2 est facile, rapide et fiable.”

DR. JAVIER TAPIA, ESPAGNE

*Céramiques feldspathiques et céramiques feldspathiques renforcées à la leucite

GC G-CEM LinkAce

Ciment résine auto-adhésif dual



Peut se conserver à température ambiante



Ni mordantage ni agent de collage



Un mode chémopolymérisable efficace pour une polymérisation optimale



Des résultats esthétiques à long terme

Source : Dr. Frédéric Raux, France

Vous recherchez les meilleurs résultats même lorsque la lumière ne peut pas traverser la restauration ? Choisissez G-CEM LinkAce, qui se caractérise par une chémopolymérisation efficace pour des résultats prévisibles à chaque fois ! Grâce à son initiateur et son traitement de charges exclusif, il apporte une liaison fiable, une stabilité de la teinte à long terme et une résistance à l'abrasion élevée.

Avantages cliniques déterminants

- Un **mode chémopolymérisable efficace**, garantie d'une polymérisation optimale même sous des restaurations opaques ou épaisses
- **Pas de pré-traitement** de la dent **ni d'application de primer** pour le métal et la zircone
- Rapide et simple : ni mordantage ni agent de collage
- Une fine épaisseur de film (3µm) qui assure un **excellent ajustage de la prothèse**
- Une **excellente stabilité de la teinte** pour des résultats esthétiques à long terme

Avantages pratiques

- Ciment résine **facile à utiliser**
- **Réfrigération non nécessaire**, se conserve à température ambiante
- Coût moyen: €€€€€€

Applications cliniques

	Métal / céramo-métal	Céramiques feldspathiques*	Disilicate de Lithium	Zircone/ Alumine	Composite / composite fibro-renforcé
Inlays / onlays	●	●	●	N.C.	●
Couronnes / bridges	●	●	●	●	●
Tenons / inlay-cores	●	N.C.	N.C.	●	●

“La plupart du temps, j'utilise ce ciment pour les restaurations céramique et en zircone. J'aime particulièrement le fait que ce soit un matériau à prise duale avec une chémopolymérisation efficace, garantissant une polymérisation sûre même lorsque la transmission de la lumière est limitée. Le matériau présente des résultats esthétiques et est facile à utiliser !”

DR. ANJA BARABA, CROATIE

*Céramiques feldspathiques et céramiques feldspathiques renforcées à la leucite

GC G-CEM LinkForce

Colle à prise duale

Résistance et esthétique en un seul système pour toutes les indications et pour tous les substrats. G-CEM LinkForce est une colle universelle idéale à chaque fois qu'une rétention supplémentaire est demandée et indispensable pour tous les blocs CAD/CAM céramiques ou hybrides comme le CERASMART.

Avantages cliniques déterminants

- Une adhésion sûre **dans toutes les situations avec un seul système, et 3 éléments de base** :
 - G-Premio BOND adhère à TOUTES les préparations sans compromis
 - G-Multi Primer garantit une adhésion stable à TOUTES les restaurations
 - G-CEM LinkForce fournit une liaison puissante **dans TOUTES les indications**
- Une photopolymérisation optimale pour les indications de facettes
- **Un mode chémopolymérisable efficace**, très utile pour les restaurations opaques ou épaisses

Avantages pratiques

- Une solution puissante, esthétique et universelle pour tous vos défis de en matière de collage
- Le choix entre **quatre teintes** esthétiques et leur « **Try-in pastes** » correspondantes
- Coût moyen: €€€€€


Applications cliniques

	Métal / céramo-métal	Céramiques feldspathiques*	Disilicate de Lithium	Zircone / Alumine	Composite / composite fibro-renforcé	Céramique hybride (ex : CERASMART)
Inlays / onlays	●	●	●	N.C.	●	●
Couronnes / bridges	●	●	●	●	●	●
Facettes	N.C.	●	●	N.C.	●	●
Tenons / inlay-cores	●	N.C.	N.C.	●	●	N.C.

“J'utilise G-CEM LinkForce comme mon premier choix dans toutes les indications cliniques. Il continue à me surprendre, jour après jour”.

DR. CASTI, ITALIE

*Céramiques feldspathiques et céramiques feldspathiques renforcées à la leucite

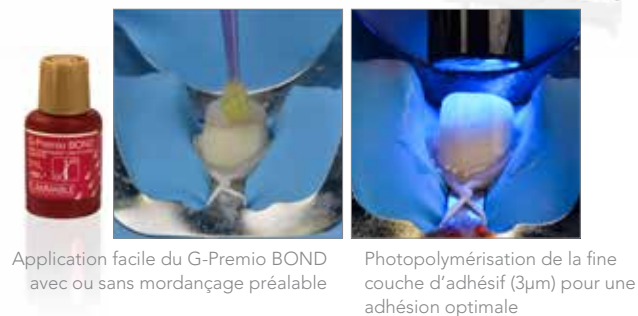

Source : Dr. Antonio Saiz-Pardo, Espagne

GC G-ænial Universal Flo

Composite photopolymérisable

Un composite injectable polyvalent, pour le collage des facettes.

G-ænial Universal Flo est généralement utilisé comme liner ou matériau de restauration, mais peut également être utilisé dans le collage des facettes et des inlays et onlays dès lors que la photopolymérisation est possible.



Distribution aisée

Consistance thixotropique
Retrait aisé des excès



Composite photopolymérisable :
esthétique élevée dans le temps

Source : Prof. Jean-François Lasserre, France

Avantages cliniques déterminants

- Composite injectable avec une excellente consistance thixotrope et une **viscosité initiale élevée** pour un **placement aisé des facettes**
- Grâce à son mode de distribution directe, le risque de bulles d'air au niveau des joints est limité
- Résistance à l'abrasion élevée et excellente polissabilité pour une **esthétique à long terme**
- **Bonne alternative au composite chauffée** avec moins de risque d'échec des fines restaurations indirectes

Avantages pratiques

- Rationaliser vos stocks avec ce matériau polyvalent !
- Une large gamme de teintes : 15 teintes proposées

Applications cliniques

	Céramique vitreuse*	Céramique hybride (ex : CERASMART)	Composite
Facettes	●	●	●
Inlays / onlays	● (épaisseur < 2.0 mm)	● (épaisseur < 2.0 mm)	● (épaisseur < 2.0 mm)

"Bien connu pour ses propriétés optiques et mécaniques, G-ænial Universal Flo est une bonne solution pour les restaurations directes et le collage (facettes, inlays et onlays). De nos jours, le praticien est à la recherche d'un matériau polyvalent et le G-ænial Universal Flo répond pleinement à cette exigence. Sa viscosité élevée permet un contrôle facile des excès et une mise en place aisée de la restauration".

DR. STEPHEN KOUBI, FRANCE

*Céramiques feldspathiques, céramiques renforcées à la leucite et disilicate de lithium

Ciments provisoires GC...

GC Freegenol

Ciment oxyde de zinc



Caractéristiques

- Solution provisoire polyvalente
- Consistance et temps de prise ajustables
- Retrait aisé des excès
- Sans eugénol, sans interaction avec les ciments résine

GC Fuji TEMP LT

Ciment verre-ionomère conventionnel en cartouche pâte/pâte



Caractéristiques

- Rétention suffisante et retrait aisé
- Positionnement facile grâce à son épaisseur de film (6µm)
- Consistance caoutchouteuse pour un retrait aisé des excès
- Radioopaque
- Idéal pour le scellement sur piliers implantaires

Découvrez également nos Primers GC...

Que vous préfériez un primer spécialisé ou un primer universel, GC a une solution.

Solution universelle G-Multi PRIMER

Un primer universel pour **TOUTES** les restaurations indirectes.



Solutions spécialisées Ceramic Primer II

Un primer spécialisé pour les **restaurations esthétiques indirectes**. Compatible avec les céramiques vitreuses, hybride, zircone, alumine et restaurations composite.



Metal Primer Z


L' incontournable pour toutes les **restaurations métallique et céramo-métal**.



Guide de scellement. Trouvez le bon ciment pour relever et maîtriser tous vos défis!

	Inlays & onlays				Couronnes & Bridges				Tenons & inlay-cores			Facettes
	Métal	• Céramique feldspathique • Céramique renforcée à la leucite	• Disilicate de lithium • Composite (ex : GC GRADIA PLUS)	Céramique hybride (ex : CERASMART)	• Métal (ex : GC Initial Cast NP) • Zircon (ex : Disques Zircon GC Initial) • Alumine	• Disilicate de lithium • Composite (ex : GC GRADIA PLUS)	• Céramiques feldspathique • Renforcée à la leucite	Céramique hybride (ex : CERASMART)	Composite fibre renforcé (ex : EverStick POST & GC Fiber post)	Métal	Zircon (ex : Disques Zircon GC Initial)	• Céramique feldspathique • Céramique renforcée à la leucite • Disilicate de lithium • Céramique hybride (ex : CERASMART) • Composite
Fuji I Verre ionomère conventionnel 	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
Fuji PLUS Verre ionomère modifié à la résine 	●	● (inlays)	●	-	●	●	-	-	●	●	●	-
FujiCEM 2 Verre ionomère modifié à la résine 												
G-CEM LinkAce Ciment résine auto-adhésif 	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-
G-CEM Ciment résine auto-adhésif 												
G-CEM LinkForce Colle composite duale 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G-ænial Universal Flo Composite 	-	● (si moins de 2.0 mm d'épaisseur)*1	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●

Découvrez plus de propriétés à propos de nos ciments de scellement

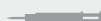	Verre ionomère conventionnel		Verre ionomère modifié à la résine				Ciment résine auto-adhésif		Ciment résine adhésive	
	Fuji I 	Fuji I 	Fuji PLUS 	Fuji PLUS EWT*2 	Fuji PLUS 	FujiCEM 2 SL 	G-CEM 	G-CEM LinkAce 	G-CEM LinkForce 	G-ænial Universal Flo 
Teintes	Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune, Translucent & A3	A3	Jaune & A3	Jaune pâle	A2, Translucent, AO3 & BO1	A2, Translucent, AO3 & BO1	A2, Translucent, Opaque & Bleach	A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE & AE
Temps de mélange	20 sec	10 sec	20 sec	20 sec	10 sec	10-15 sec	10 sec	10-15 sec	10-15 sec	N.A.
Temps de travail	2 min	2 min15	2 min 30	3 min 30	2 min	2 min 15	2 min 30	2 min 50	3 min	N.A.
Début de la finition (à partir de la mise en place de la restauration)	4 min 30	4 min 30	4 min 30	5 min 45	4 min 15	4 min 30	4 min	4 min	4 min	N.A.


Notes : *1 Pour les restaurations indirectes de fine épaisseur (≤ 2mm) permettant l'utilisation d'une technique purement photopolymérisable. *2 : EWT : temps de travail étendu, parfait pour le scellement des bridges.

Unissons nos forces - découvrez les solutions de GC pour tous vos défis en matière d'adhésion


FujiCEM 2 & Fuji PLUS

Ciment verre-ionomère modifié par adjonction de résine

La référence des CVIMAR. Les solutions adaptées pour des procédures classiques sans souci, surtout pour les restaurations à base de métal, céramo-métal et zircon. Un « must » indispensable, surtout lorsque le contrôle de l'humidité devient un défi !

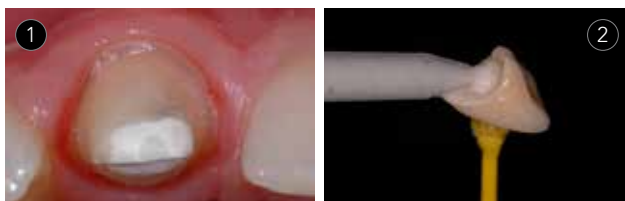

- 1 | Solution parfaite pour les limites sub-gingivales !
- 2 | Distribution facile
- 3 | Retrait aisé des excès
- 4 | La protection totale de la dent

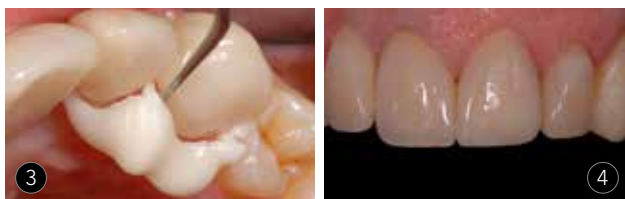

Source : Prof. Jean-François Lasserre (1), Dr. Frédéric Raux (2 et 4) et Dr. Emmanuel d'Incau (3), France

G-CEM LinkAce

Ciment résine auto-adhésif dual

Avec sans doute la meilleure capacité de chémpolymérisation de sa catégorie... il garantit une excellente polymérisation même lorsque la transmission de la lumière à travers la restauration est limitée.



- 1 | Peut se conserver à température ambiante
- 2 | Ni mordantage ni agent de collage
- 3 | Un mode chémpolymérisable efficace pour une polymérisation optimale même lorsque la transmission de la lumière est limitée !
- 4 | Résultat esthétique durable dans le temps



Source : Dr. Frédéric Raux, France

G-CEM LinkForce

Colle composite

Lorsqu'un collage sans compromis s'avère nécessaire, ce produit est LA solution. Cette colle universelle vous permet de standardiser votre protocole, et offre une puissante adhésion dans toutes les indications.



- 1 | Application simple du G-Premio BOND
- 2 | Photopolymérisation de la fine couche de composite pour une adhésion optimale
- 3 | Primer universel pour une adhésion stable à tous substrats
- 4 | Mise en place facile et adaptation parfaite



Source : Dr. Antonio Saiz-Pardo, Espagne

Fuji I	
	000136 Intro Pack (Poudre Light Yellow 35 g & Liquide 20 ml)
	000134 Recharge - Poudre 35 g Light Yellow
	000135 Recharge - 20 ml (25 g) Liquide
	000240 50 Capsules Light Yellow
Fuji PLUS	
	001409 Intro Package - Coffret complet A3 (Poudre 15g A3, Liquide 7 ml & Conditioner 6,5 ml)
	000231 Recharge - EWT (Temps de travail étendu) Poudre A3 15g
	000219 Recharge - Poudre 15g Yellow
	001410 Recharge - Poudre 15g Translucent
	001411 Recharge - Poudre 15g A3
	000220 Recharge - Liquide 7 ml (8 g)
	000222 50 Capsules Yellow
	001418 50 Capsules A3
FujiCEM 2	
	900897 Recharge - 2 cartouches Paste Pak (13,3g / 7.2 mL)
	900898 Automix Package - 2 cartouches Paste Pak (13,3g) & 44 mixing tips
	900902 20x Mixing Tips SL, pack recharge
	900903 10x Mixing Tips SL pour endo, pack de recharge
	001573 GC Paste Pak Dispenser
	004647 GC FujiCEM 2 Dispenser
G-CEM	
	002588 50 Capsules Assorties : A2 et Translucent (20 de chaque), AO3 et BO1 (5 de chaque)
	002584 50 Capsules A2
	002585 50 Capsules AO3
	002586 50 Capsules Translucent
	002587 50 Capsules BO1
	004414 50x GC Capsule elongation tips
G-CEM LinkAce	
	004857 Recharge - 2 x 4.6 g (2.7 ml) A2
	004858 Recharge - 2 x 4.6 g (2.7 ml) Translucent
	004859 Recharge - 2 x 4.6 g (2.7 ml) AO3
	004860 Recharge - 2 x 4.6 g (2.7 ml) BO1
	900668 10x GC Automix Tip Regular
	900495 10x GC Automix Tip pour Endo

G-CEM LinkForce	
	009540 System Kit : 1x G-CEM LinkForce A2, 1x G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce Try-in Pastes (A2 & Translucent), GC Etchant & accessoires
	009542 Starter Kit A2 : 1x G-CEM LinkForce A2 (8.7g), G-Premio BOND, G-Multi PRIMER & accessoires
	009543 Starter Kit Translucent (TR) : 1x G-CEM LinkForce Translucent (8.7g), G-Premio BOND, G-Multi PRIMER & accessoires
	009544 Recharge A2 - 1x 8.7g
	009545 Recharge Translucent (TR) - 1x 8.7g
	009546 Recharge Opaque - 1x 8.7g
	009547 Recharge Bleach - 1x 8.7g
	009548 1x Try-In Paste 1.5g A2
	009549 1x Try-In Paste 1.5g Translucent (TR)
	009550 1x Try-In Paste 1.5g Opaque
	009551 1x Try-In Paste 1.5g Bleach
	009036 G-Premio BOND 5 ml
	009552 G-Premio BOND DCA 3 ml
G-aenial Universal Flo	
	004213 seringue 2 ml (3.4 g) - BW (bleach)
	004202 seringue 2 ml (3.4 g) - A1
	004203 seringue 2 ml (3.4 g) - A2
	004204 seringue 2 ml (3.4 g) - A3
	004212 seringue 2 ml (3.4 g) - AO3
	004215 seringue 2 ml (3.4 g) - JE (junior enamel)
	004634 30x Dispensing Tip III plastic
	004635 30x Dispensing Tip III Needle metal
	Egalement disponible A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3 & AE (adult enamel)
Ciments provisoires	
	Freegenol 000087 1-1 Pack tubes (55 g Base, 20 g Accelerator, 2.5 ml Cleaner)
	Fuji TEMP LT 004253 2 Cartouches Paste Pak 13.3 g (7.2 ml)
Primers	
	G-Multi PRIMER 009553 G-Multi PRIMER, Liquide 5 ml
	Ceramic Primer II 008551 GC Ceramic Primer II, Liquide 3 ml
	008620 GC Ceramic Primer II pack de 10 unidoses
	Metal Primer Z 009295 GC METAL PRIMER Z, Liquide 5 ml

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
http://france.gceurope.com

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Classe IIa Lire attentivement les instructions figurant dans le mode d'emploi avant toute utilisation. Organisme certificateur : n°0086 - Distribués par GC France

'GC.'