



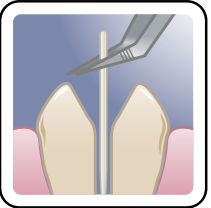
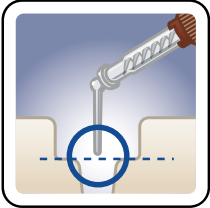
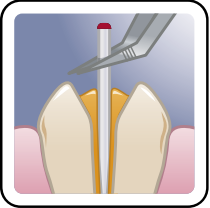
PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Solocore

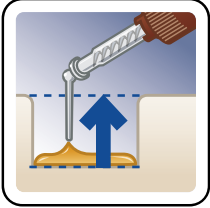
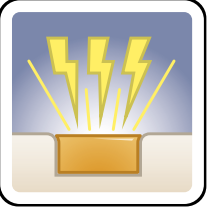
Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1. Pour scellement du tenon :

1  Rincer parfaitement	2  Sécher avec une pointe papier	3  Appliquer le collage dans la racine	4  Retirer les excès avec une pointe papier	
5  Photopolymériser	6  Appliquer Solocore à la lumière du canal radiculaire	7  Positionner le tenon	8  Retirer les excès	9  Photopolymériser ⌚ 20 sec.

Après application de l'adhésif selon son protocole :

2. Pour reconstitution du faux moignon :

1  Appliquer de bas en haut	2  Photopolymériser ⌚ 40 sec.	3  Auto-polymérisation ⌚ 3 min.	4  Taille du faux-moignon
5  Polissage			

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.