




PROTOCOLE ILLUSTRÉ

Astralight Home 16 PC - Starter kit

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1. PRÉPARATION DE LA GOUTTIÈRE

1

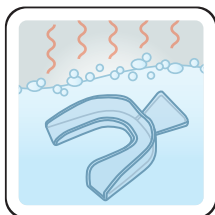

Placer la gouttière dans de l'eau bouillante afin de ramolir le matériau

 **8 à 10 sec.**

2



Placer la gouttière en bouche et la façonner manuellement **bouche fermée**

3



Retirer la gouttière et la rincer à **l'eau froide**


2. APPLICATION

1



Se rincer la bouche à l'eau et se laver les dents

2

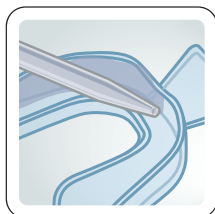

Appliquer le produit sur la face de la gouttière qui sera en contact avec la surface dentaire à éclaircir

3



Placer la gouttière en bouche

La retirer au bout de  **30 à 40 min.**

4



Nettoyer la gouttière à **l'eau froide** à l'aide d'1 brosse à dent et rincer abondamment

5

Répéter le traitement quotidiennement pendant 3 à 4 semaines (1 seringue 3 ml / semaine)



*Ne pas mordre excessivement.
Ne pas avaler le produit.
Ne pas boire ni manger pendant le traitement.*

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.