

Atverkite duris paprastesnėms
procedūroms



Universalaus
atspalvio
Essentia[®]

iš GC

1 atspalvis, 3 patikimi
pasirinkimai visoms šoninių
dantų restauracijoms

GC


Universalaus atspalvio Essentia® iš GC

1 atspalvis, 3 patikimi pasirinkimai visoms

GC kompanijos sukurtos ir pavyzdiniu atskaitos tašku restauruojamosios odontologijos srityje tapusios Essentia medžiagos dėka, pristatoma nauja estetinio plombavimo koncepcija vartojant tik septynis medžiagos atspalvius bei atveriamos durys į paprastesnių odontologinių procedūrų pasaulį.

Su **universalaus atspalvio Essentia** medžiaga, GC kompanija itin palengvina restauruojamųjų defektų atstatymą. Šis kompozitas - tai **puikus pasirinkimas šoninių dantų restauracijoms**: vienas atspalvis su nepakartojamu suderinamumo efektu, dabar pasiekiamas trijų klampumų formomis. **Atsižvelgiant į tai, kas naudingiausia kiekvienam atvejui** - rinkitės iš pastos, injekuojamos formos ar labai tautos kompozito. Šie universalaus atspalvio medžiagos variantai **tinkami visų klasių ertmių atstatymui** - nuo kaklelio iki kramtomo paviršiaus restauracijų.

Universalaus atspalvio Essentia medžiagos tvirtumas ir nusidėvėjimas atsižvelgiant į kompozito klampumą (šaltinis: GCC R ir D duomenys)

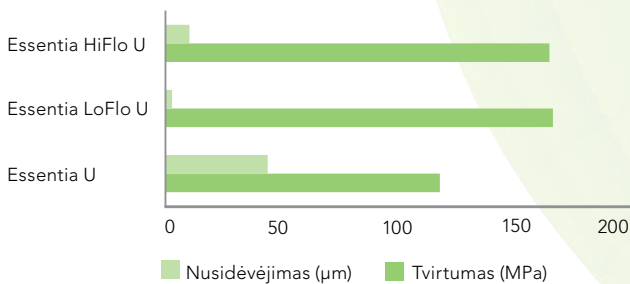

Dėka patentuoto užpildo ir itin smulkių dalelių naudojimo, fizikinės Essentia HiFlo ir Essentia LoFlo medžiagų savybės yra netgi geresnės nei Essentia Universal kompozito, o tai dar kartą įrodo, jog kiekviena iš trijų klampumo formų tinkama visoms indikacijoms.



Mažos I klasės ertmės paruošimas



Restauravimas naudojant Essentia HiFlo Universal



Pooperacinis vaizdas, kuriame stebimas puikus medžiagos susiliejimas su natūraliais dantimis



šoninių dantų atstatymo indikacijoms



Nekariozinių pažeidimų gydymas



Restauravimas su
Essentia LoFlo Universal




Pooperacinis vaizdas po poliravimo



Essentia HiFlo – tai skystas kompozitas, pasižymintis geromis drėkinimo savybėmis, puikiai prisitaikantis prie restauracijos paviršiaus ir pasiekiantis net siauriausias ertmes. Paprastas naudojimas šia medžiaga, restauracijos tvirtumas bei daugiau nei 300% siekiantis rentgenokontrastiškumas, -visa tai palengvina antrinio karieso aptikimą.



Essentia LoFlo – švirkščiamas **mažo takumo** kompozitas, tinkamas, kuomet reikia tiksotropinės medžiagos – pavyzdžiui, kaklelinių defektų restauravimui. Ši medžiaga pasižymi minimaliu nusidėvėjimo laipsniu bei užtikrina ilgalaikę restauraciją net ir kramtomajame paviršiuje.

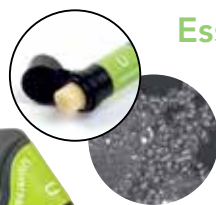

Essentia – supaprastintas 7 atspalvių pastos konsistencijos kompozitas. Universalios spalvos medžiagoje persipina puikus susiliejimo su aplinkiniais audiniais efektas ir lengvai **modeliuojama konsistencija**: viskas, ko reikia vienspalvėms šoninių dantų restauracijoms.



Tiesioginis danties vainiko atstatymas po endodontinio gydymo



Dentino pagrindas atkurtas naudojant **everX Posterior** medžiagą, paviršinis sluoksnis- **Essentia Universal**



Apžiūros metu, po 6 mėnesių pasitvirtino gera restauracijos integracija su šalia esamais danties audiniais

Universalaus atspalvio Essentia iš GC

1 atspalvis, 3 patikimi pasirinkimai visoms šoninių dantų atstatymo indikacijoms



Essentia HiFlo

Universalus **didelio takumo** šviesa kietinamas kompozitas



Essentia LoFlo

Universalus **mažo takumo** šviesa kietinamas kompozitas



Essentia

Universalus **pastos konsistencijos** šviesa kietinamas kompozitas

900739 Essentia HiFlo švirkštas, U (1 x 2mL)
900741 Essentia LoFlo švirkštas, U (1 x 2mL)
900970 Essentia švirkštas, U (1 x 2mL)
900998 Essentia kapsulės, U (15 x 0.16mL)

Atraskite G-Premio BOND

GC's universali surišimo sistema be jokių kompromisų

009030 G-Premio BOND rinkinys 5ml
009036 G-Premio BOND buteliuko papildymas 5ml
009034 G-Premio BOND vienkartinės dozės,
50 vienetų (0.1ml)



e s s e n t a

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC konsultantas Dr. Valdas Vilkinis
A. Juozapavičiaus 99-3,
45266 Kaunas, Lietuva
El. paštas: v.vilkinis@nordic.gceurope.com
Tel. +370-37-340505
Mob. +370-6-9928814

'GC.'