

Volete maggior
sicurezza
nella cementazione?



Fuji PLUS di GC.

La vostra risposta alla sensibilizzazione nel post-operatorio, allo scolorimento dei margini e al cedimento dell'adesione.

Coniuga i vantaggi dei vetroionomeri e quelli della chimica delle resine.

GC

GC Fuji PLUS, il vostro cemento per fissaggio d'elezione

Fuji PLUS è stato pensato per permettervi di eseguire procedure di cementazione semplici e non soggette a errori, nonché un'adesione forte e duratura di cui vi potete fidare.

15 anni di sicurezza e affidabilità





Fuji PLUS è un cemento vetroionomerico ibrido per fissaggio che ha sempre garantito una cementazione priva di sollecitazioni nei restauri di routine su ponti e corone. Offre il livello massimo di sicurezza a fronte di eccezionali risultati clinici a lungo termine¹. Ecco perché migliaia di dentisti in tutto il mondo hanno scelto Fuji PLUS come il loro cemento per fissaggio d'elezione.

Secondo la valutazione di Reality aggiornata nel 2009: "Capsule da miscelare manualmente o in versione automix, buona consistenza che permette una facile messa in situ del restauro, traslucenza moderata che non produce l'effetto di linea bianca sul margine visibile di porcellana alla giunzione con il dente; inoltre il prodotto non cola".



Consistenza perfetta

Fuji PLUS contiene filler in vetro macinati finemente che contribuiscono a creare una miscela di cemento incredibilmente uniforme e cremosa. Grazie alle caratteristiche di fluidità che ne conseguono e ad un film a spessore ridotto pari a 10 micron, Fuji PLUS permette di cementare facilmente tutti i ponti, le corone e i restauri su pilastro/moncone.

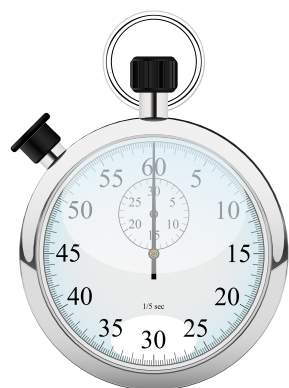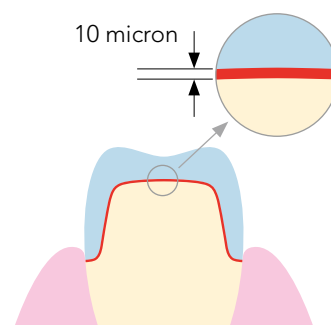

Indurimento rapido

Eliminazione del prodotto in eccesso dopo 60 secondi.

Fuji PLUS indurisce rapidamente e pertanto il cemento in eccesso può facilmente essere rimosso dopo soli 60 secondi dalla messa in situ del restauro. Se è necessario un indurimento più lento, si possono refrigerare le capsule di Fuji PLUS per allungare i tempi di lavoro e di indurimento.



Risultati clinici dimostrati abbinati ad una facilità d'uso impareggiabile

Universale

Ampia gamma di indicazioni

- Cementazione di tutti i tipi di corone, inlay, onlay e ponti in metallo, metallo-ceramica e resina²
- Cementazione di inlay in porcellana
- Cementazione di tutti i tipi di materiali per perni inclusi i perni e i pilastri prefabbricati e i pilastri ottenuti per fusione
- Corone e ponti in ceramica integrale rinforzata cementabili (es. Procera)



Sicurezza


Resistenza all'umidità

Fuji PLUS tollera l'umidità durante il posizionamento e si lega chimicamente alla dentina, allo smalto e al cemento. Il sigillo è garantito e prevedibile e pertanto l'incidenza di casi di sensibilizzazione nel post-operatorio è estremamente bassa.

Rilascio di fluoro

Il continuo rilascio di fluoro³ garantisce una protezione duratura. La resistenza agli acidi⁴ di Fuji PLUS permette di ottenere un'eccellente e duratura integrità dei margini e il mantenimento della loro tenuta.

Rilascio di fluoro

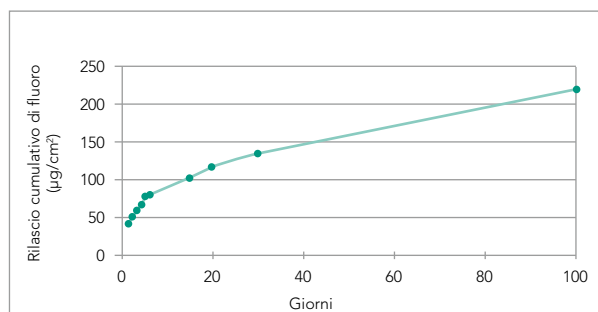


Fonte: Dati interni del reparto Ricerca e Sviluppo di GC. I dettagli sui test sono disponibili su richiesta.

Forza

Elevata forza di coesione

Poiché Fuji PLUS sfrutta la tecnologia dei prodotti ibridizzati con resina, la forza di coesione della struttura del cemento è molto maggiore. Questo accentua le proprietà adesive della chimica dei vetro-ionomeri, aumentando la forza di ritenzione⁵ del cemento.

Resistenza alla tensione del legame adesivo

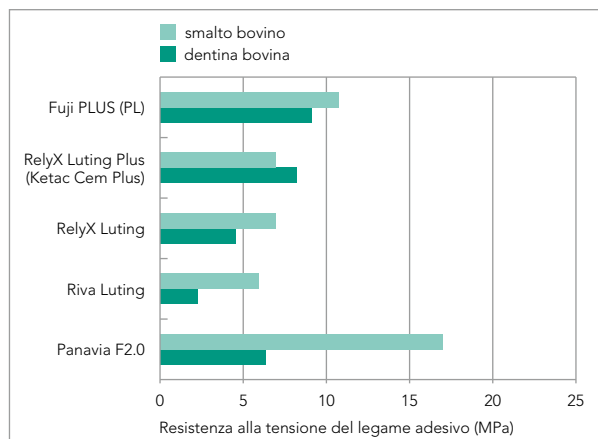

Fonte: Dati interni del reparto Ricerca e Sviluppo di GC. I dettagli sui test sono disponibili su richiesta.

¹ Resin-modified glass ionomer cement and self-cured resin composite luted ceramic inlays. A 5-year clinical evaluation. Jan W.V. van Dijken. Dental Materials 19 (2003) 670-674

² Cementing porcelain-fused-to-metal crowns. Vadachkoria D. Georgian Med News. Dicembre 2009;(177):15-9.

³ Fluoride release of resin-reinforced glass ionomer cements, H. Nakaseko, S. Tosaki and K. Hirota. IADR 1999, Abstract 972

⁴ Glass ionomer containing cements, ADA Professional Product review, Vol. 3 Numero 1, Inverno 2008

⁵ In vitro push-out strength of seven luting agents to dentin. J.-M Cheylan, S. Gonther, M. Degrange. The International Journal of Prosthodontics, Volume 15, Numero 4, 2002 - p.365-370

Il riferimento per i cementi vetro-ionomerici ibridi

Grazie alle eccellenti caratteristiche adesive e sigillanti, il prodotto garantisce una ritenzione duratura e una continua protezione del dente.

4 semplici passaggi per un'adesione affidabile



1. Pulire accuratamente la superficie dentale preparata. Per aumentare la ritenzione, applicare Fuji PLUS conditioner per 20 secondi. Sciacquare e asciugare delicatamente.



2. Miscelare la capsula di Fuji PLUS per 10 secondi. Rivestire la superficie interna del restauro con 1 mm di cemento e applicare il restauro entro 30 secondi.



3. Eliminare il cemento in eccesso quando inizia la fase di gelificazione (circa 1 minuto dopo l'applicazione).



4. Mantenere l'isolamento fino all'indurimento definitivo (circa 4 minuti).

Dott. L. Viard, Francia

La scelta d'elezione tra i cementi per fissaggio disponibile in tutti i formati



GC Fuji PLUS

GC Fuji PLUS-capsule

Confezione da 50 capsule (0,19 ml per capsula)
Colori disponibili: giallo, A3

GC Fuji PLUS 1-1PKG

Polvere, 15 g, colore A3
Liquido, 7 ml, Conditioner, 6,5 ml, Accessori

GC Fuji PLUS P/L Ricambi

Polvere, 15 g. Colori disponibili: A3, giallo, traslucido
Polvere EWT (tempo di lavoro prolungato), 15 g. Colore A3
Liquido, 7 ml, Conditioner, 6,5 ml



GC FujiCEM (Automix)

Se il restauro richiede una maggiore flessibilità, FujiCEM Automix offre tutta l'efficienza di Fuji PLUS in un comodo formato Automix. Garantisce un tempo di lavoro prolungato e un dosaggio adattabile per gli interventi post-cementazione o per ponti estesi.

GC FujiCEM Automix

2 cartucce Paste Pak (13,3 g cadauna),
44 punte di miscelazione

GC FujiCEM Automix Ricambi

2 cartucce Paste Pak (13,3 g cadauna)
20 punte di miscelazione, erogatore Paste Pak Dispenser

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.

Via Calabria 1
I - 20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info@italy.gceurope.com
http://italy.gceurope.com

