


# Metal Primer Z von GC

Der Profi für  
metallbasierte  
Gerüste &  
zur Verbindung  
von Kunststoff  
an Metall

**GC**

## Sie sind auf der Suche nach einem Haftvermittler, mit dem Sie einen starken Verbund zwischen Gerüsten und jeder Art von kunststoffbasierten Materialien herstellen können?

Mit dem Metal Primer Z stellt GC Ihnen den Nachfolger des bewährten Metal Primer II vor, der bereits seit vielen Jahren für viele Anwender die erste Wahl ist. Mit seinen zwei funktionalen Monomeren schafft der Metal Primer Z sogar einen noch stärkeren Verbund, wobei das **MDTP**-Monomer die Haftung an Edelmetalllegierungen verstärkt und das **MDP**-Monomer einen starken Verbund an Nichtedelmetalllegierungen und bei bestimmten Indikationen sogar an Zirkon ermöglicht.

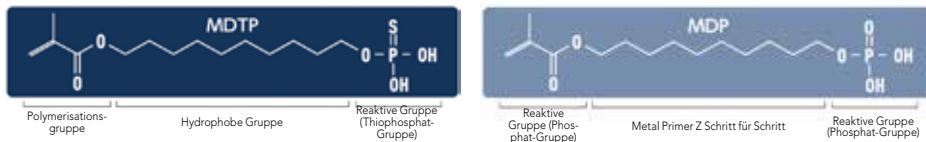

Metal Primer Z steht für folgende Eigenschaften:

- Schnelle und einfache Verarbeitung
  - Kein weiteres Zubehör
- Keine Hitzebehandlung erforderlich
  - Vermeidung unnötiger thermischer Einflüsse
- Sorgt für einen permanenten Haftverbund, auch im feuchten Milieu
  - Kann direkt im Mund angewendet werden
- Universelle Anwendung
  - Verwendbar mit allen Dentallegierungen und Kunststoffen sowie Zirkon



Wann immer Sie mit Metallgerüsten und kunststoffbasierten Materialien arbeiten, sollten Sie diese Universallösung wählen.

- Auftragen von (Opaker) kunststoffbasierten Materialien auf Metall und Zirkon für Kronen und Brücken
- Verbund oder Reparatur von metallbasierten Gerüsten, Klammern oder Geschieben



Metal Primer Z Step-by-Step



Sandstrahlen



Auftragen



Kunststoff/Opaker

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 http://www.gceurope.com

**GC Germany GmbH**  
 Seifgrundstraße 2  
 D-61348 Bad Homburg  
 Tel. +49.61.72.99.59.60  
 Fax. +49.61.72.99.59.66.6  
 info@germany.gceurope.com  
 http://germany.gceurope.com

**GC AUSTRIA GmbH**  
 Tallak 124  
 A-8103 Gratwein-Strassengel  
 Tel. +43.3124.54020  
 Fax. +43.3124.54020.40  
 info@austria.gceurope.com  
 http://austria.gceurope.com

**GC AUSTRIA GmbH**  
 Swiss Office  
 Bergstrasse 31c  
 CH-8890 Flums  
 Tel. +41.81.734.02.70  
 Fax. +41.81.734.02.71  
 info@switzerland.gceurope.com  
 http://switzerland.gceurope.com

**GC**