

Reconstructeur de moignons Proclinic Expert



Le reconstructeur de moignons **Proclinic Expert** est un composite à double réaction de prise, hautement radio opaque et très fluide il est doté d'excellentes propriétés mécaniques. Son conditionnement en seringue auto - mélange facilite l'application.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

Sa haute résistance à la compression permet de réaliser des restaurations extrêmement durables.

SC : autopolymérisation. LC : photopolymérisation*

Reconstructeur de moignons Proclinic Expert

322 MPa (SC) → 349 MPa (LC)

Autres marques

250 MPa → 300 MPa

CHARGE D'OBTURATION

La charge d'obturation élevée du composite qui compose le Reconstructeur de moignons Proclinic Expert (70 % pondéral) assure une grande résistance à l'usure.

FORCE D'ADHÉSION À LA DENTINE

Grande force d'adhésion à la dentine (22 MPa), ce qui assure des restaurations durables.

- Deux indications pour un même produit : reconstruction de moignons et scellement des tenons.
- Bonne thixotropie, assurant une bonne maniabilité du produit et une adaptation facile dans les préparations irrégulières et lors du scellement des tenons.
- Radio-opacité élevée, ce qui facilite le suivi à long terme du traitement.
- Pointes de mélange optimisées, qui permettent de n'utiliser que le matériau nécessaire.
- Pointes intra-orales qui facilitent l'accès aux zones postérieures.

Reconstructeur de moignons Proclinic Expert

1 seringue de 10 g, 5 pointes de mélange
et 5 pointes intra-orales (type 4)

REORDER
78560

 **proclinic**
expert



TEINTE DENTINE

Sa teinte semblable à celle de la dentine permet d'obtenir des restaurations hautement esthétiques sans structure métallique.

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Les restaurations obtenues sont plus durables, grâce à sa faible solubilité dans l'eau.

Reconstructeur de moignons Proclinic Expert

10 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$

Autres marques

25 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$

ABSORPTION D'EAU

Sa faible absorption d'eau facilite l'obtention de restaurations qui restent stables au fil du temps, sans risque de décoloration.

Reconstructeur de moignons Proclinic Expert

<0,1 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$

Autres marques

2,5 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$



Dr. Eduardo González Arroyo

Clínica Fernández

www.oralurgerytube.com

Numéro d'inscription à l'ordre des dentistes 28007247


« Les difficultés de la reconstruction des moignons sont plus faciles à gérer avec un matériau résistant, maniable et d'action rapide, comme le nouveau produit Reconstructeur de moignons Proclinic Expert »

Dr. Carlos Gargallo

Clínica Carlos Gargallo

Numéro d'inscription à l'ordre des dentistes 3947

« L'utilisation du Reconstructeur de moignons Proclinic Expert est très satisfaisante, car il présente une très bonne viscosité, résiste à la sculpture et est très facile à utiliser. De plus, il change de couleur avec la prise, indiquant que la polymérisation est correcte. »

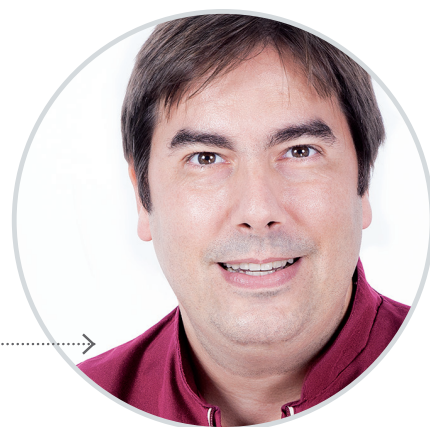

Reconstructeur de moignons
Proclinic Expert

REORDER
78560

 **proclinic**
expert