



FujiCEM 2 de GC

Un ciment verre ionomère modifié
par adjonction de résine de qualité
supérieure bénéficiant de notre technologie
innovante **Force & Fusion** pour
une totale tranquillité d'esprit.

GC

Suivez l'évolution des matériaux dentaires et passez à **l'étape suivante**

L'amélioration continue a toujours été une progression naturelle pour une entreprise comme GC.

GC FujiCEM 2, ciment de scellement verre ionomère modifié à la résine en pâte/pâte, combine les dernières technologies en matière de verre ionomère, une grande fiabilité et une utilisation améliorée pour de meilleures performances.





**GC FujiCEM 2
Automix**



GC FujiCEM
Automix

GC FujiCEM

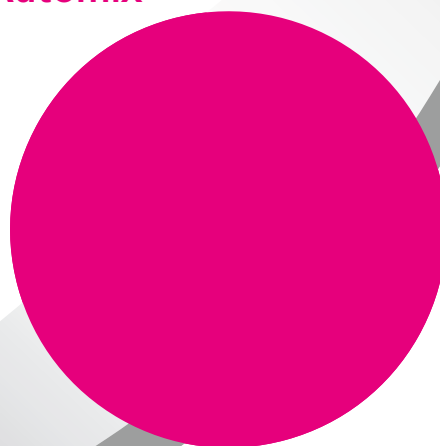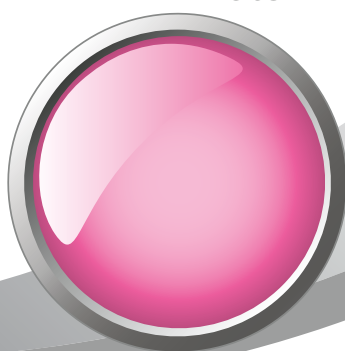

Notre expérience au service des procédures de scellement

Se basant sur la fiabilité de ses prédécesseurs, **GC FujiCEM 2** est le résultat d'une décennie d'expérience avec **plus de 150 millions de couronnes collées dans le monde entier**. **GC FujiCEM 2** vous offre la fiabilité et la simplicité dont vous avez besoin pour réaliser des scellements performants grâce à des propriétés physiques élevées et une manipulation confortable.

La tranquillité d'esprit à chaque étape

La manipulation et le confort de travail sont des critères de confiance déterminants. Peu importe votre façon de l'appliquer, **GC FujiCEM 2** garantit une procédure simple avec plusieurs options, vous laissant libre de vos choix :



Choisissez votre distributeur préféré

En plus du distributeur métallique déjà existant (Paste Pak Dispenser), vous avez la possibilité d'utiliser un applicateur plastique 85% plus léger, autoclavable et moins coûteux.



Choisissez votre manipulation préférée

Mélange manuel

Vous pouvez choisir l'option mélange manuel. Mélange simple et rapide des pâtes A et B.



Automix

La version Automix est parfaite pour un mélange plus rapide et plus précis, sans risque de bulles ou de vides, plus faciles.



FujiCEM 22 propose désormais le système **SLIDE & LOCK**, un design amélioré de la cartouche et des embouts de mélange pour une mise en place et un retrait plus faciles.



Choisissez votre embout de mélange préféré

Au côté des embouts de mélange type "regular", vous trouverez les GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL type Endo caractérisés par une élévation fine et coudée pour un accès plus facile dans le canal ou la mandibule.

GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL



GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
for Endo



Dr. L. Dahan, France

Ce que vous pouvez attendre de **GC FujiCEM 2**

Avec ce système complet de scellement – basé sur la technologie du verre ionomère modifié par adjonction de résine - vous avez choisi une solution sûre pour vos patients. Ce matériau revendique les 5 propriétés principales suivantes :

1



Un éventail étendu d'indications

- Inlays, onlays, Couronnes et bridges à base de métal
- Inlays, onlays, couronnes et bridges à base de résine
- Inlays tout céramique
- Inlays, onlays, couronnes et bridges tout céramique haute résistance (ex : zircone, disilicate de lithium...)
- Tenons fibrés, céramiques et métalliques



D. Galle, Belgique

2



Une rétention élevée

Ce ciment offre un équilibre chimique optimum pour une adhésion maximum aux substances dentaires, alliages ou composites. La résistance initiale élevée à la compression et à la flexion constitue le meilleur des supports pour vos restaurations indirectes.

3



Une libération soutenue de fluor

Sur le long terme, la pâte libère nettement plus de fluor que tout autre ciment résine auto-adhésif.

4



Un scellement et une intégrité marginale

L'adhésion chimique à la structure de la dent maintient le scellement marginal, minimise le risque de hiatus marginal et de caries secondaires.

5



Une absence de sensibilité post-opératoire

Non irritant pour les structures de la dent ou des tissus environnants, il ne présente aucun risque de sensibilités post-opératoires pour vos patients.

Technologie Innovante pour des restaurations longue durée

Résistant à l'humidité



FujiCEM 2 exclut le recours à une digue ou autre protection pour contrôler l'humidité.

Auto-adhésif



Ni mordancage, ni système de collage en plusieurs étapes.

Consistance idéale



La pâte malaxée ne coule pas, mais permet un écoulement parfait sous pression lors de la mise en place.

Épaisseur de film inégale



Il s'écoule parfaitement sous pression pour aboutir à une épaisseur de film incroyablement fine.

Facile à nettoyer



Une minute après le collage, le ciment atteint une consistance caoutchouteuse permettant de retirer simplement et proprement les excès de matériau.

Restauration longue durée



Absence de sensibilité post-opératoire, adhésion durable et libération de fluor soutenue.

Dr. F. Raux, France



LA TECHNOLOGIE FORCE & FUSION

Renforcé par la technologie Force & Fusion, GC FujiCEM 2 double sa résistance au cisaillement par rapport au FujiCEM original, se traduisant par des restaurations encore plus durables.*

*Données sur demande

FORCE

Une nouvelle technologie de monomère « haute élasticité »

La longue chaîne flexible de monomères donne au **GC FujiCEM 2** une résistance à la flexion supérieure et agit comme un absorbeur de choc pour mieux résister aux charges occlusales.



FUSION

Traitement innovant de la surface des charges

Cela crée une puissante adhésion entre les particules et la matrice résineuse.

GC FujiCEM 2,

sûr, facile à utiliser et polyvalent

Conditionnement

GC FujiCEM 2		
900898	GC FujiCEM 2 SL Automix	Cartouche SL Paste Pak (13,3g / 7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (44)
900897	GC FujiCEM 2 SL Recharge	che SL Paste Pak (13,3g / 7.2 mL) (2) avec bloc de mélange (No. 22)
900901	GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit avec Paste Pak Dispenser (métal)	Cartouche SL Paste Pak (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL type Endo (5), Paste Pak Dispenser (métal) (1)
900900	GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit avec GC FujiCEM 2 Dispenser (plastique)	Cartouche SL Paste Pak (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL type Endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (plastique) (1)
GC FujiCEM 2 Accessoires		
900902	GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL, recharge	GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (20)
900903	GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL type Endo, recharge	GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (10)
001573	Paste Pak Dispenser	Paste Pak Dispenser (métal) (1)
004647	GC FujiCEM 2 Dispenser	GC FujiCEM 2 Dispenser (plastique) (1)



GC FujiCEM 2 SL Automix



GC FujiCEM 2 SL Refill



GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit avec GC FujiCEM 2 Dispenser

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
<http://benelux.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
<http://switzerland.gceurope.com>

