


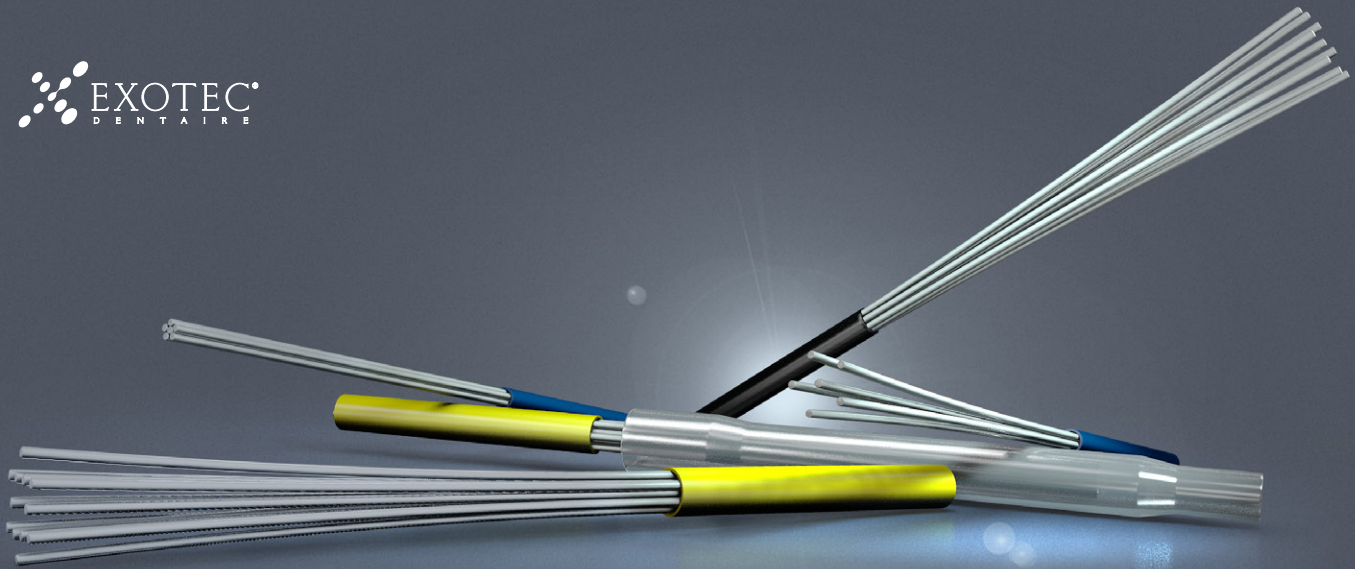

CORPORIS® MT

MICRO-TENONS FASCICULÉS EN FIBRE DE VERRE UDMA POUR LA RÉALISATION DE RECONSTITUTION CORONO-RADICULAIRE

Corporis® MT, l'union décuple la force.

❖ RÉSISTANCES MÉCANIQUES DÉCUPLÉES

- L'optimisation de l'espace canalaire par les micro-tenons maximise résistance et rétention.
- La résistance des micro-tenons à la rupture en flexion est augmentée de 15%, la résistance à l'arrachement de 45% par rapport aux reconstitutions traditionnelles.
- La répartition des micro-tenons sur la périphérie du canal renforce également la résistance mécanique de la reconstitution.

❖ ÉCONOMIE TISSULAIRE MAXIMALE

- Les micro-tenons Corporis® MT s'adaptent à toute morphologie canalaire (canaux courbes, ovales, évasés...).
- La flexibilité des micro-tenons leur permet de suivre la courbure naturelle du canal radiculaire.

❖ SUPPRESSION DE L'ALÉSAGE CANALAIRE


Le canal radiculaire doit être désobturé et nettoyé, l'usage des micro-tenons ne nécessite pas de mise en forme spécifique.

❖ TRANSLUCIDE ET RADIO-OPAQUE

Les micro-tenons Corporis® MT sont conducteurs de lumière et radio-opaques.



Répartition des micro-tenons sur la périphérie du canal

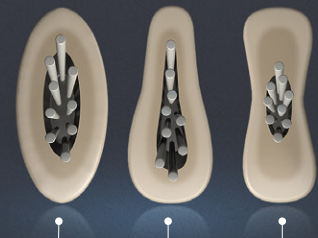

Adaptation naturelle aux différentes morphologies canalaire



1 boîte contenant 10 micro-tenons :

- Bleu / 6 brins - Diam. 1.0
- Noir / 9 brins - Diam. 1.2
- Jaune / 12 brins - Diam. 1.4

- RÉF. TE08002
- RÉF. TE08003
- RÉF. TE08004

Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire®

Bio Composants Médicaux
215 Route de Bavonne - ZA le Talamud
38140 Saint Blaise de Buis - France



Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.

Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.