

MTA



EMTACURE / EMTAVERSE / EMTASEAL

CIMENTS MTA POUR DE MULTIPLES INDICATIONS À VISÉE ENDODONTIQUE



HAUTEMENT BIOCOMPATIBLE ET BIOACTIF

- Formation de dentine tertiaire sur la pulpe ("pont dentinaire").
- Formation d'hydroxyde de calcium et d'apatite → effet bactéricide



CARACTÉRISTIQUES IDÉALES DU MATÉRIAU

- Excellente adhérence à la dentine
- Stabilité dimensionnelle (pas de retrait)
- Excellente étanchéité
- Très faible solubilité
- pH élevé → Bactériostatique
- Hautement radio-opaque → Control radiographique aisé



CONDITIONNEMENT EN CAPSULE DIRECTCAPS PRÊTES À VIBRER


- Reproductibilité assurée à chaque traitement
- Mélange homogène
- Manipulation sécurisée
- Consistance optimale pour chaque indication




INDICATIONS MULTIPLES

	Indications	Temps de mélange	Temps de travail	Temps de prise
EMTAVERSE	• Coiffage pulpaire • Apexification • Obturation a-retro • Réparation des perforations canalaire	30 sec.	2 min.	Prochaine étape clinique possible 5 min. après application
EMTACURE	• Matériau optimisé pour la réparation des perforations canalaire (consistance ferme)	30 sec.	2 min.	Prochaine étape clinique possible 5 min. après application
EMTASEAL	• Obturation canalaire en combinaison avec une pointe de Gutta Percha	30 sec.	10 min.	< 60 minutes

Zones de traitement

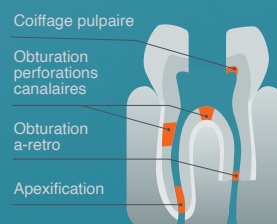

EMTAVERSE / EMTACURE

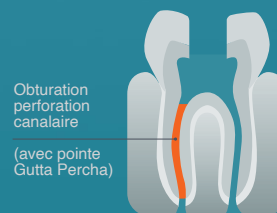

EMTASEAL



EMTAVERSE : 2 CAPSULES 0,25 G
EMTACURE : 2 CAPSULES 0,25 G
EMTASEAL : 2 CAPSULES 0,25 G + ACCESSOIRES

RÉF. EN05003
 RÉF. EN05004
 RÉF. EN05001

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
 Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
 D-27570 Bremerhaven
 (Germany)

