



EMTAMIX

RÉSINE BIOACTIVE DUAL À CHARGES MTA
INDIQUÉE POUR L'OBTURATION CANALAIRE
EN COMBINAISON AVEC UNE DE POINTE GUTTA



Zone de traitement



MATÉRIAU BIOACTIF

Libère des ions calcium
→ stimule la formation de tissu dentinaire,
formation d'apatite.



pH ALCALIN 12

Effet bactéricide
→ favorise la guérison et protège
des sensibilités.



CONSISTANCE SOFT

→ favorise les reprises ou
le retrait du matériau (pour
la mise en place d'un tenon
par exemple).



RÉTRACTION QUASI INEXISTANTE

→ parfaite étanchéité et
adaptation aux parois canalaire.



RADIO-OPACITÉ À 300% AI

Contrôle radiographique simplifié.




FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- En seringue automix + embouts intra-canaux.
- Micro-seringues d'application fournies
→ évite la formation de bulles.
- Temps de travail : 10 minutes
- Photopolymérisation : 40 secondes en surface
- Poursuite du traitement possible immédiatement
après obturation.



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Résistance à la compression : 110 Mpa
- Dureté shore finale : 80

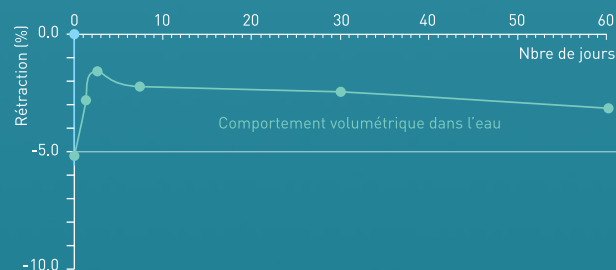

• 1 SERINGUE 2,5 ML + ACCESSOIRES

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

