

Uniamo le forze!



**Soluzioni
intelligenti**
da GC
anche per i fissaggi
più complessi

GC

Come si sceglie il cemento ottimale?

Oggi più che mai, la gamma di opzioni per la pianificazione e realizzazione dei restauri indiretti è enorme. Dal momento in cui il paziente arriva in studio, il dentista deve considerare numerosi aspetti prima di decidere il piano di trattamento.

Tutti i dentisti sanno che non esistono due pazienti uguali e dunque è importante adottare un approccio olistico nella pianificazione delle cure tenendo in considerazione la scelta di restauri indiretti e il tipo di preparazione più adatti alla situazione clinica del singolo paziente.

Una parte importante di questo processo è costituita dalla scelta del cemento da fissaggio corretto



La domanda fondamentale da porsi prima di fare la scelta definitiva è:
Qual è per me il cemento da fissaggio ottimale che contribuisca a:

Proteggere
la struttura
dentale?

Proteggere
il restauro
protesico?

La selezione del cemento più appropriato garantisce la soddisfazione del paziente anche nel tempo




Scoprite le 5 soluzioni di GC per tutti i tipi di fissaggi

Con oltre 95 anni di esperienza e un portafoglio prodotti tra i più completi sul mercato, noi di GC riteniamo di essere il partner ideale in grado di guidarvi nella scelta della soluzione di fissaggio più adatta.

Perché dopo tutto un fissaggio efficace è il risultato di un'attività di squadra.

Ogni singola soluzione di fissaggio offerta da GC è adatta a diverse situazioni cliniche e offre caratteristiche uniche e specifiche, ad esempio proprietà fisiche, tempo di lavoro, protocollo d'uso, rilascio di fluoro e costo...

Uniamo le forze!

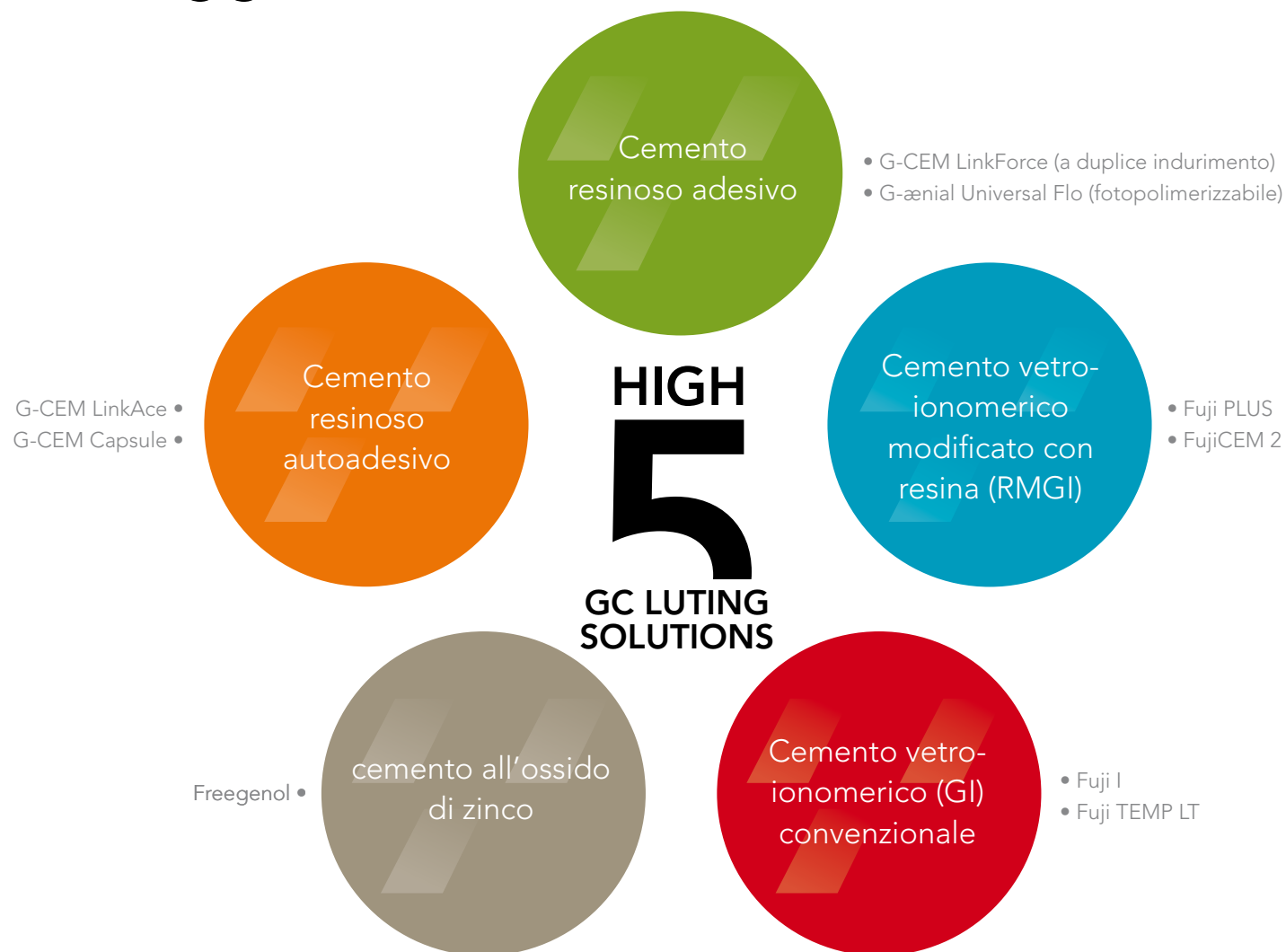



In base alla situazione clinica, la prima domanda da porsi è... devo usare un CEMENTO o un SISTEMA ADESIVO?

Quando è indicato l'uso di un cemento?

Tipicamente quando la preparazione consente di ottenere una ritenzione meccanica adeguata.

Gli aspetti clinici indicati di seguito sono determinanti nella scelta della procedura di CEMENTAZIONE ottimale:

La preparazione garantisce una buona ritenzione



Scegliere un cemento **GI** & **RMGI** che offre il miglior equilibrio fra facilità d'uso, rapidità e protezione del dente.

Non è possibile isolare



Scegliere un cemento **GI** or **RMGI** poiché questi cementi tollerano bene l'umidità e garantiscono un'eccellente adesione chimica al dente.

E' richiesta una qualità estetica intermedia



Scegliere un cemento **GI** or **RMGI** quando la situazione clinica e/o il substrato selezionato (zirconia, metallo e metallo-ceramica) non richiedono un cemento di qualità estetica elevata.

Pazienti con esigenze particolari



Scegliere un cemento **GI** or **RMGI** per pazienti ad elevato rischio di carie e pazienti anziani.

Le vostre opzioni

Cemento vetro-ionomerico (GI) convenzionale - Soluzione GC: **Fuji I**

Cemento vetro-ionomerico modificato con resina (RMGI). Soluzioni GC: **Fuji PLUS** e **FujiCEM 2**

"Nella maggior parte dei casi, i margini della preparazione sono subgengivali e risulta difficile controllare perfettamente l'umidità!"

Quando è indicato l'uso di un sistema adesivo?

Tipicamente, l'uso di un sistema adesivo è indicato quando è necessaria un'adesione supplementare o l'estetica è particolarmente importante.

La preparazione non garantisce una buona ritenzione



Scegliere un **cemento resinoso adesivo**, quando la preparazione non garantisce una buona ritenzione.

Si può usare un **cemento autoadesivo** (facilità d'uso) per preparazioni con un grado normale di ritenzione.

Isolamento possibile



Scegliere un cemento **autoadesivo** o un **cemento resinoso adesivo** quando si riesce ad avere un campo di lavoro asciutto.

E' richiesta una qualità estetica elevata



Scegliere un cemento **autoadesivo** o un **cemento resinoso adesivo** per risultati altamente estetici.

E' necessaria un'adesione supplementare



Scegliere un **cemento resinoso adesivo** per il bonding di faccette e di ceramiche ibride (ad esempio CERASMART).

Le vostre opzioni

Cemento resinoso autoadesivo | Soluzioni GC: **G-CEM LinkAce** e **G-CEM Capsule**

Cemento resinoso adesivo Soluzioni GC | Soluzioni GC: **G-CEM LinkForce (duplice indurimento)** e **G-aenial Universal Flo (fotopolimerizzabile)**

Scoprite tutte le soluzioni GC per il fissaggio!

Con un portafoglio prodotti tra i più completi sul mercato, noi di GC possiamo aiutarvi a mantenere il sorriso dei vostri pazienti.



Le nostre soluzioni per la cementazione permanente

Cementi vetro-ionomerici		Cementi in resina composita	
	Fuji I  Cemento vetro-ionomerico (GI) convenzionale • Soluzione economica • Cemento privo di resina Pagina 7		G-CEM LinkAce & G-CEM Capsule  Cemento resinoso autoadesivo • Modalità di autoindurimento efficiente • Facilità d'uso Pagina 10
	Fuji PLUS  Cemento vetro-ionomerico modificato con resina (RMGI) • Successo clinico a lungo termine • Cemento facile da usare Pagina 8		G-CEM LinkForce  Cemento resinoso adesivo • Ottima adesione • Estetica eccellente Pagina 11
	FujiCEM 2  Cemento vetro-ionomerico modificato con resina (RMGI) • Facilità d'uso • Versatilità Pagina 9		G-aenial Universal Flo  Composito per restauri iniettabile per il bonding di faccette (fotopolimerizzabile) • Estetica eccellente • Proprietà fisiche eccezionali Pagina 12

Le nostre soluzioni per la cementazione provvisoria

Cemento all'ossido di zinco		Cemento vetro-ionomerico convenzionale	
	Freegenol  Pagina 13		Fuji TEMP LT  Pagina 13

GC Fuji I

Cemento vetro-ionomerico convenzionale

Il cemento da fissaggio biocompatibile, privo di resina con 25 anni di storia e di successi clinici. Fuji I è il primo cemento vetroionomerico da fissaggio di GC ed è ormai ampiamente usato in tutto il mondo. Scoprite perché Fuji I è ancora un materiale d'elezione.



Soluzione economica



Cemento privo di resina
per pazienti allergici al
metacrilato (resina)



Buona soluzione per la cementazione di abutment
implantari. La facilità di rimozione del materiale in
eccesso riduce il rischio di peri-implantite.

Fonte: Dr. Emmanuel d'Incau, Francia

Vantaggi clinici principali

- **Adesione chimica** alla struttura dentaria che garantisce un eccellente **sigillo marginale**
- **Soluzione efficace anche in presenza di umidità** quando non è possibile garantire la presenza di un campo asciutto
- **Veloce e semplice** in quanto non richiede mordenzatura o bonding del dente
- **Cemento privo di resina** per pazienti allergici al metacrilato (resina)
- **Assenza quasi totale di sensibilità nel post-operatorio:** soluzione atraumatica per la polpa

Vantaggi pratici

- Soluzione **economica e facile da usare** per i restauri a base di metallo
- Impatto economico: €€€€€

Applicazioni cliniche

	Metallo/Metallo- ceramica	Zirconia/ Allumina
Inlays / onlays	●	N.A.
Corone/ponti	●	●
Perni/monconi-inlay	●	-

"Fuji I è perfetto per la cementazione definitiva di elementi fissi su abutment implantari. La rimozione del materiale in eccesso è semplice e facile da controllare e questo riduce il rischio di peri-implantite".

DR. EMMANUEL D'INCAU, FRANCIA

GC Fuji PLUS

Cemento vetro-ionomerico modificato con resina



Successo clinico a lungo termine



Equilibrio perfetto tra protezione del dente e adesione



Facile rimozione del materiale in eccesso



Soluzione prevedibile e affidabile

Efficiente e consolidato da oltre 20 anni – soluzione predicibile e affidabile.

GC Fuji PLUS è uno dei prodotti più conosciuti ed è considerato un materiale di riferimento nella sua categoria. Offre la protezione dentale di un cemento vetro-ionomerico unitamente alla resistenza e all'estetica di un cemento resinoso.

Vantaggi clinici principali

- **Adesione chimica** alla struttura dentaria che garantisce un eccellente **sigillo marginale**
- **Soluzione efficace anche in presenza di umidità** quando non è possibile garantire la presenza di un campo asciutto
- **Veloce e semplice** in quanto non richiede mordenzatura o bonding del dente
- Consistenza gommosa in fase iniziale per una **facile rimozione del materiale in eccesso**
- **Assenza quasi totale di sensibilità nel post-operatorio**: soluzione atraumatica per la polpa

Vantaggi pratici

- **Resa comprovata e prevedibile** nella maggior parte dei casi di routine
- Disponibile in diversi colori
- Disponibile anche in versione con tempo di lavoro prolungato (EWT) per ponti estesi
- Impatto economico: €€€€€

Applicazioni cliniche

	Metallo/metallo-ceramica	Ceramiche feldspatiche/leucite*	Disilicato di litio	Zirconia/Allumina	Composito/Composito rinforzato con fibre
Inlays / onlays	●	● (inlay)	●	N.A.	●
Corone / ponti	●	-	●	●	●
Perni / monconi-inlay	●	N.A.	N.A.	●	●

“Nel nostro studio usiamo Fuji PLUS da quasi vent’anni. Ad oggi, non ricordo nessun insuccesso e abbiamo cementato oltre 5000 tra corone e ponti!”

DR. HAN HEESSEN, OLANDA

* Ceramiche feldspatiche e ceramiche rinforzate con leucite

GC FujiCEM 2

Cemento vetro-ionomerico modificato con resina

La semplicità è innovazione! Primo cemento vetro-ionomerico modificato con resina in formato pasta-pasta. Questo cemento da fissaggio facile da usare e versatile è il partner perfetto per la maggior parte delle cementazioni di routine.

Vantaggi clinici principali

- **Adesione chimica** alla struttura dentaria che garantisce un eccellente **sigillo marginale**
- **Soluzione efficace anche in presenza di umidità**: un "must" quando non è possibile garantire la presenza di un campo asciutto
- **Veloce e semplice** in quanto non richiede mordenzatura o bonding del dente
- Consistenza gommosa in fase iniziale per una **facile rimozione del materiale in eccesso**
- **Assenza quasi totale di sensibilità nel post-operatorio**: soluzione atraumatica per la polpa

Vantaggi pratici

- Sta a voi scegliere tra la versione con miscelazione manuale e quella con automiscelazione!
- Impatto economico: €€€€€

Applicazioni cliniche

	Metallo/metallo-ceramica	Ceramiche feldspatiche/leucite*	Disilicato di litio	Zirconia / Allumina	Composito/Composito rinforzato con fibre
Inlays / onlays	●	● (inlay)	●	N.A.	●
Corone / ponti	●	-	●	●	●
Perno / monconi- inlay	●	N.A.	N.A.	●	●

"Perché scegliere una procedura di bonding altamente sensibile alla tecnica impiegata quando si può avere l'eccellente adesione chimica alla dentina, l'ottimo sigillo marginale e la resistenza di un cemento vetro-ionomerico modificato con resina? FujiCEM 2 è facile, veloce e affidabile".

DR. JAVIER TAPIA, SPAGNA

* Ceramiche feldspatiche e ceramiche rinforzate con leucite



Miscelazione manuale

Automiscelazione



Facile erogazione

Semplice rimozione del materiale in eccesso

Fonte: Dr. Frédéric Raux, Francia

GC G-CEM LinkAce

Cemento resinoso autoadesivo

Volete risultati ottimali anche quando la luce non riesce a passare attraverso il restauro? Scegliete G-CEM LinkAce, il cemento con proprietà di autoindurimento eccellenti per risultati prevedibili a ogni applicazione! Grazie allo speciale attivatore e alle speciali particelle del filler, il prodotto offre un'adesione affidabile, stabilità cromatica sul lungo periodo ed elevata resistenza all'usura.



Può essere conservato a temperatura ambiente



Non è necessario mordenzare o applicare adesivi sul dente



Modalità efficiente di autoindurimento per una polimerizzazione ottimale



Risultati estetici duraturi

Fonte: Dr. Frédéric Raux, Francia

Vantaggi clinici principali

- L'efficiente modalità di **auto-indurimento** garantisce una **polimerizzazione ottimale** anche sotto restauri opachi o spessi
- **Nessun trattamento preliminare** del dente o **applicazione di primer** per il metallo o la zirconia
- Lo spessore ridotto del film (3µm) garantisce un **eccellente adattamento della protesi**
- **Ottima stabilità cromatica** per risultati estetici duraturi

Vantaggi pratici

- Cemento resinoso **facile da usare**
- **Non è necessario conservare il prodotto in frigorifero**: è sufficiente conservarlo a temperatura ambiente
- Impatto economico: €€€€€

Applicazioni cliniche

	Metallo/metallo-ceramica	Ceramiche feldspatiche/leucite*	Disilicato di litio	Zirconia/Allumina	Composito/Composito rinforzato con fibre
Inlays / onlays	●	●	●	N.A.	●
Corone/ponti	●	●	●	●	●
Perni/monconi-inlay	●	N.A.	N.A.	●	●

"Uso questo cemento soprattutto per i restauri in zirconia e ceramica. Mi piace in particolare il fatto che è un materiale a duplice indurimento con un'eccellente caratteristica di autoindurimento che garantisce un'ottima polimerizzazione anche in presenza di una trasmissione limitata della luce. Il materiale inoltre garantisce risultati estetici e facilità d'uso".

DR. ANJA BARABA, CROAZIA

* Ceramiche feldspatiche e ceramiche rinforzate con leucite

GC G-CEM LinkForce

Cemento resinoso adesivo a duplice indurimento

Resistenza ed estetica in un unico sistema per tutte le indicazioni, tutti i substrati. G-CEM LinkForce è il cemento resinoso adesivo universale ideale quando è necessario ottenere una ritenzione supplementare e un "must" per tutte le ceramiche CAD/CAM e le ceramiche ibride in blocco quali CERASMART.

Vantaggi clinici principali

- Adesione sicura **in tutte le situazioni con un unico sistema composto da tre elementi di base:**
 - G-Premio BOND si lega a **TUTTE** le preparazioni senza compromessi
 - G-Multi Primer garantisce un'adesione stabile a **TUTTI** i restauri
 - G-CEM LinkForce offre un legame forte **in TUTTE le indicazioni**
- Fotopolimerizzazione ottimale per le indicazioni sulle faccette
- **Modalità di autoindurimento efficiente**, utile per cementare restauri più opachi o spessi

Vantaggi pratici

- La soluzione universale, estetica ed efficiente per tutti i casi complessi di cementazione adesiva
- Scelta tra **quattro colori estetici** con le corrispondenti **paste per la prova in bocca**
- Impatto economico: €€€€€€


Applicazioni cliniche

	Metallo/metallo-ceramica	Ceramiche feldspatiche/leucite*	Disilicato di litio	Zirconia/Allumina	Composito/Composito rinforzato con fibre	Ceramiche ibride (come CERASMART)
Inlays / onlays	●	●	●	N.A.	●	●
Corone/ponti	●	●	●	●	●	●
Faccette	N.A.	●	●	N.A.	●	●
Perni/monconi-inlay	●	N.A.	N.A.	●	●	N.A.

"Uso G-CEM LinkForce come materiale d'elezione in tutte le indicazioni cliniche. Continua a sorprendermi giorno dopo giorno".


DR. CASTI, ITALIA

* Ceramiche feldspatiche e ceramiche rinforzate con leucite

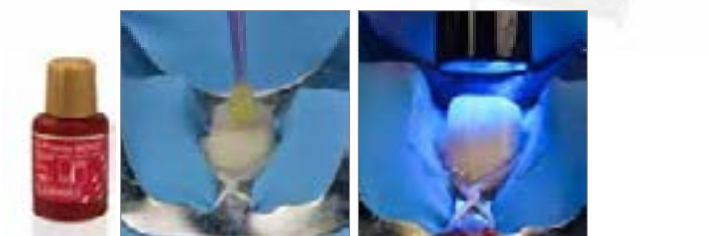

Facile applicazione di G-Premio BOND con o senza mordenzatura preliminare

Fotopolimerizzazione dello strato sottile di bonding (3µm) per un'adesione ottimale

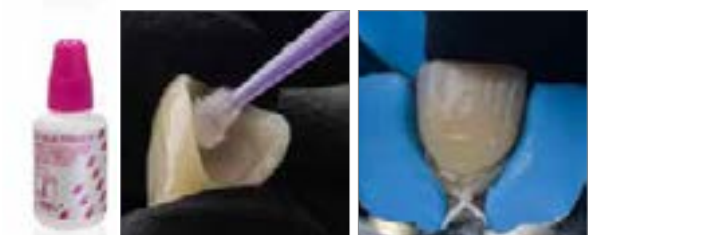

Un solo primer universale per un'adesione stabile su tutti i substrati

Facile messa in situ e adattamento perfetto grazie a uno spessore molto ridotto del film


Fonte: Dr. Antonio Saiz-Pardo, Spagna

GC G-aenial Universal Flo

Composito per cementazione
fotopolimerizzabile

Un composito per restauri iniettabile perfetto per il bonding delle faccette.

G-aenial Universal Flo viene generalmente utilizzato come un materiale per restauri e come sottofondo, ma può anche essere utilizzato per il bonding di faccette e di alcuni inlay e onlay dove è possibile fotopolimerizzare.

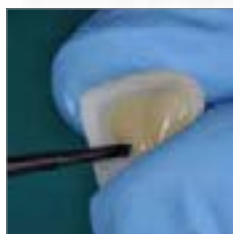

Facile erogazione



Consistenza tissotropica:
facile rimozione del
materiale in eccesso



Composito fotopolimerizzabile: Estetica ottima
e durevole



Vantaggi clinici principali

- Composito iniettabile con eccellente consistenza tissotropica ed **elevata viscosità** iniziale per un **facile posizionamento delle faccette**
- Grazie all'erogazione diretta in situ, il rischio di formazione di bolle sui margini è limitato
- Elevata resistenza all'usura ed eccellente lucidabilità per un risultato estetico duraturo
- **Buona alternativa ai compositi riscaldati** con minor rischio di insuccesso nei restauri indiretti sottili

Vantaggi pratici

- Razionalizzazione delle scorte in quanto è un prodotto multi-funzione!
- Ampia gamma di colori: 15 colori

Applicazioni cliniche

	Vetro-ceramiche*	Ceramiche ibride (come CERASMART)	Composito
Veneers	●	●	●
Inlays / onlays	● (< 2.0 mm spessore)	● (< 2.0 mm spessore)	● (< 2.0 mm spessore)

“Rinomato per le sue proprietà ottiche e meccaniche, G-aenial Universal Flo è una buona soluzione per i restauri diretti e la cementazione (faccette, inlay e onlay). Oggigiorno i professionisti vogliono un materiale multi-funzione e G-aenial Universal Flo soddisfa proprio questo requisito. La sua elevata viscosità consente di controllare facilmente il materiale in eccesso e di posizionare e mettere in situ facilmente il restauro”.

DR. STEPHEN Koubi, Francia

* Ceramiche feldspatiche, ceramiche rinforzate con leucite e disilicato di litio

Cementi provvisori di GC...

GC Freegenol

Cemento all'ossido di zinco



Caratteristiche

- Soluzione provvisoria per tutte le applicazioni
- Consistenza e tempi di indurimento regolabili
- Facile rimozione del prodotto in eccesso
- Privo di eugenolo, evitare qualunque interazione con i cementi resinosi

GC Fuji TEMP LT

Cemento vetro-ionomerico convenzionale in cartuccia Paste-pak



Caratteristiche

- Ritenzione garantita e facile rimozione
- Facile alloggiamento grazie allo spessore ridotto del film (6µm)
- Consistenza iniziale simile a quella della gomma per una facile rimozione del prodotto in eccesso
- Radiopaco
- Ideale per la cementazione su monconi implantari

Venite anche a scoprire i primer di GC...

GC ha la soluzione adatta sia per coloro che preferiscono un primer specializzato sia per chi predilige un primer universale.

Soluzione universale G-Multi PRIMER

Un solo primer universale per **TUTTI** i restauri indiretti.



Soluzioni specializzate Ceramic Primer II

Primer specializzato per tutti i **restauri indiretti** estetici. Compatibile con restauri in vetro-ceramica, ceramica ibrida, allumina e composito.




Metal Primer Z

Il TOP per tutti i **restauri in metallo e in metallo-ceramica**.



Mappa per orientarsi tra i prodotti GC per il fissaggio. Trovate i cementi più adatti per vincere tutte le sfide nell'ambito del fissaggio!

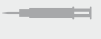	Inlay & onlay				Corone e ponti				Perni e monconi-inlay			Faccette
	Metallo	- Ceramiche feldspatiche - Ceramiche rinforzate con leucite	- Disilicato di litio - Composito (es. GC GRADIA PLUS)	Ceramiche ibride (es. CERASMART)	- Metallo (es. GC Initial Cast NP) - Zirconia (es. GC Initial Zirconia disk) - Allumina	- Disilicato di litio - Composito (es. GC GRADIA PLUS)	- Ceramiche feldspatiche - Ceramiche rinforzate con leucite	Ceramiche ibride (es. CERASMART)	Composito rinforzato con fibra (es. EverStick POST & GC Fiber post)	Metallo (es. GC Initial Cast NP)	Zirconia (es. dischi di GC Initial Zirconia)	- Ceramiche feldspatiche - Ceramiche rinforzate con leucite - Disilicato di litio - Ceramiche ibride (es. CERASMART) - Composito
Fuji I Cemento vetro-ionomerico convenzionale 	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
Fuji PLUS Cemento vetro-ionomerico modificato con resina 	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	-
FujiCEM 2 Cemento vetro-ionomerico modificato con resina 		(inlay)										
G-CEM LinkAce Cemento resinoso autoadesivo 	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-
G-CEM Capsule Cemento resinoso autoadesivo 												
G-CEM LinkForce Cemento resinoso adesivo 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G-aenial Universal Flo Composito per cementazione 	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●

(se meno di 2,0 mm di spessore)*1

Le caratteristiche dei cementi da fissaggio GC

	Vetro-ionomero convenzionale		Vetro-ionomero modificato con resina				Cemento resina autoadesivo		Sistemi di cementazione adesiva	
	Fuji I 	Fuji I 	Fuji PLUS 	Fuji PLUS EWT*2 	Fuji PLUS 	FujiCEM 2 	G-CEM 	G-CEM LinkAce 	G-CEM LinkForce 	G-aenial Universal Flo 
Colori	Giallo chiaro	Giallo chiaro	Giallo, traslucido e A3	A3	Giallo & A3	Giallo chiaro	A2, Traslucido, AO3 e BO1	A2, Traslucido, AO3 e BO1	Traslucido, Opaco e Bleach	A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE e AE
Tempo di miscelazione	20 sec	10 sec	20 sec	20 sec	10 sec	10-15 sec	10 sec	10-15 sec	10-15 sec	N.A.
Tempo di lavoro	2 min	2 min 15	2 min 30	3 min 30	2 min	2 min 15	2 min 30	2 min 50	3 min	N.A.
Tempo di inizio della finitura finale (a partire dal posizionamento della protesi)	4 min 30	4 min 30	4 min 30	5 min 45	4 min 15	4 min 30	4 min	4 min	4 min	N.A.

Notes: *1 Per restauri indiretti con spessore ridotto (≤ 2 mm) che consentono l'impiego di una tecnica di fotopolimerizzazione pura. *2: EWT: EWT – tempo di lavoro prolungato: perfetto per la cementazione di ponti.

Uniamo le forze! Ecco le soluzioni principali che GC offre per il fissaggio anche nei casi più complessi

FujiCEM 2 & Fuji PLUS

Cemento vetro-ionomerico modificato con resina

Consolidati come benchmark nella categoria. Sono anche soluzioni affidabili ideali per le procedure di routine, soprattutto per i restauri in metallo, metallo-ceramica e zirconia. Sono dei "must" soprattutto quando è difficile controllare l'umidità.



- 1 | Soluzione perfetta per i margini sub-gengivali
- 2 | Facile erogazione
- 3 | Facile rimozione del prodotto in eccesso
- 4 | Protezione completa del dente



Fonte: Prof. Jean-François Lasserre (1), Dr. Frédéric Raux (2 e 4), Dr. Emmanuel d'Incau (3), Francia

G-CEM LinkAce

Cemento resinoso autoadesivo

Grazie alla capacità di autoindurimento probabilmente migliore nella sua categoria, il prodotto garantisce un'eccellente polimerizzazione anche quando la trasmissione della luce attraverso il restauro è limitata.



- 1 | Può essere conservato a temperatura ambiente
- 2 | Non è necessario mordenzare la superficie dentale o usare bonding
- 3 | Modalità di auto-indurimento efficiente per un'ottima polimerizzazione anche quando la trasmissione della luce è limitata
- 4 | Risultati estetici duraturi



Fonte: Dr. Frédéric Raux, Francia

G-CEM LinkForce

Cemento resinoso adesivo

Quando non si può scendere a compromessi sull'adesione, questo prodotto è la soluzione per eccellenza. Questo cemento resinoso adesivo universale consente di lavorare in modo standardizzato e offre un'adesione forte in tutte le indicazioni.



- 1 | Facile applicazione di G-Premio BOND
- 2 | Fotopolimerizzazione dello strato di bonding sottile per un'adesione ottimale
- 3 | Primer universale per un'adesione stabile a tutti i substrati
- 4 | Facile posizionamento e adattamento perfetto



Fonte: Dr. Antonio Saiz-Pardo, Spagna

Fuji I	
	000136 Intro Package (1x Polvere Light Yellow 35 g & 1x Liquido 20 ml)
	000134 Refill- 35 g Polvere Light Yellow
	000135 Refill- 20 ml (25 g) Liquido
	000240 50 Capsules Light Yellow
Fuji PLUS	
	001409 Intro Package - Full Set A3 (15 g Polvere A3, 7 ml Liquido & 6,5 ml conditioner)
	000231 Refill- EWT (extended working time version) 15 g Polvere A3
	000219 Refill- 15 g Polvere Yellow
	001410 Refill- 15 g Polvere Translucent
	001411 Refill- 15 g Polvere A3
	000220 Refill- 7 ml (8 g) Liquido
	000222 50 Capsules Yellow
	001418 50 Capsules A3
FujiCEM 2	
	900897 Refill - 2x Paste Pak cartucce (13,3 g / 7.2 mL)
	900898 Automix Package - 2x Paste Pak cartucce (13,3g) & 44 mixing tips
	900902 20x Mixing Tips SL, Refill Pack
	900903 10x Mixing Tips SL for Endo, Refill Pack
	001573 GC Paste Pak Dispenser
	004647 GC FujiCEM 2 Dispenser
G-CEM	
	002588 50 Capsules Assorted (20 each of A2 and Translucent, 5 each of AO3 and BO1)
	002584 50 Capsules A2
	002585 50 Capsules AO3
	002586 50 Capsules Translucent
	002587 50 Capsules BO1
	004414 50x GC Capsule elongation tips
G-CEM LinkAce	
	004857 Refill- 2 x 4.6 g (2.7 ml) A2
	004858 Refill- 2x 4.6 g (2.7 ml) Translucent
	004859 Refill- 2 x 4.6 g (2.7 ml) AO3,
	004860 Refill- 2 x 4.6 g (2.7 ml) BO1
	900668 10x GC Automix Tip Regular
	900495 10x GC Automix Tip for Endo

G-CEM LinkForce			
	009540	System Kit: 1x G-CEM LinkForce A2, 1x G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce Try-in Pastes (A2 & Translucent), GC Etchant & accessori	
	009542	Starter Kit A2: 1x G-CEM LinkForce A2 (8.7g), G-Premio BOND, G-Multi PRIMER & accessori	
	009543	Starter Kit Translucent (TR): 1x G-CEM LinkForce Translucent (8.7g), G-Premio BOND, G-Multi PRIMER & accessori	
	009544	Refill A2- 1x 8.7g	
	009545	Refill Translucent (TR)- 1x 8.7g	
	009546	Refill Opaque- 1x 8.7g	
	009547	Refill Bleach - 1x 8.7g	
	009548	1x Try-In Paste 1.5 g A2	
	009549	1x Try-In Paste 1.5 g Translucent (TR)	
	009550	1x Try-In Paste 1.5 g Opaque	
	009551	1x Try-In Paste 1.5 g Bleach	
	009036	G-Premio BOND 5 ml	
009552	G-Premio BOND DCA 3 ml		
G-aenial Universal Flo			
	004213	1x 2 ml (3.4 g) syringe - BW (bleach)	
	004202	1x 2 ml (3.4 g) syringe - A1	
	004203	1x 2 ml (3.4 g) syringe - A2	
	004204	1x 2 ml (3.4 g) syringe - A3	
	004212	1x 2 ml (3.4 g) syringe - AO3	
	004215	1x 2 ml (3.4 g) syringe - JE (junior enamel)	
	004634	30x Dispensing Tip III plastic	
	004635	30x Dispensing Tip III Needle metal	
Also available in A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3 & AE (adult enamel)			
Cementi provvisori			
	Freegenol	000087	1-1 Pack tubi (55 g Base, 20 g Acceleratore, 2.5 ml Cleaner)
	Fuji TEMP LT	004253	2x 13.3 g (7.2 ml) Paste Pak cartucce
Primers			
	G-Multi PRIMER	009553	G-Multi PRIMER, 5 ml Liquido
	Ceramic Primer II	008551	GC Ceramic Primer II, 3ml Liquido
		008620	GC Ceramic Primer II Unit dose pack (10 pcs)
	Metal Primer Z	009295	GC METAL PRIMER Z, 5 ml Liquido

GC EUROPE N.V. | Sede centrale
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.
Via Calabria 1
20098 San Giuliano Milanese
Milano

Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info@gcitalia.it
www.gcitalia.it

'GC.'